

INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

ELEGANTE-apparat för tryckbehandling av ben+ lår



Mirusens tryckbehandlingsapparat för fötter och vader är en enkel apparat för att förbättra cirkulationen och avlägsna svullnader, som används i hemmiljö och på små rehabiliterings-, sjukgymnastik- och hälsokliniker.

Fördelar:

Mirusens set med 2 benmanschetter stimulerar cirkulationen och lymfflödet i de nedre extremiteterna.

- eliminerar svullnader av olika ursprung,
- kämpar mot ett allvarligt bensyndrom,
- Idealisk för att förebygga åderbräck,
- Stödjer viktnedgång och bekämpning av celluliter,
- eliminerar smärta till följd av så kallad "ömheter".




Kompressionsmassage (tryckterapi) har en välgörande effekt på patientens kropp.

- underlättar utflödet av venöst blod.
- stimulering av cirkulations- och lymfsystemen, vilket resulterar i en ökad tillförsel av syre och näringsämnen till organen.
- Ökar hastigheten för avlägsnande av nedbrytningsprodukter från kroppen, eliminering av kongestiva symtom, absorption av ödem.
- Minskar blodets motstånd i artärerna och underlättar därmed hjärtfunktionen.
- Utvidgning av blod- och lymfkärl, vilket ökar blodcirkulationshastigheten.

Tack vare dessa egenskaper har pneumatisk kompressionsmassage fått stor användning inom behandling och rehabilitering. Presoterapi kan utföras dagligen. En enda behandling bör ta ca 10-20 minuter. Redan efter den första behandlingen kan en känsla av lätthet kännas.

Tekniska data:

- Ingång: 220-240 V / 50-60 HZ
- Certifierad: CE ROHS FDA
- Massageområde: fot+ vad
- 6 program, 3 intensitetsnivåer, låg och hög värme.
- 3 knappar för enkel styrning av massageapparaten med en handhållen styrenhet.
- Bred justerbar benmanschett som enkelt kan justeras
- En liten styrenhet med många program.

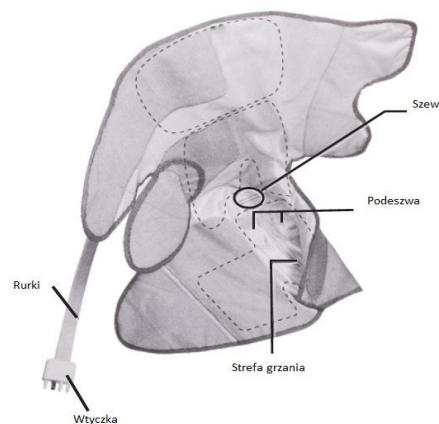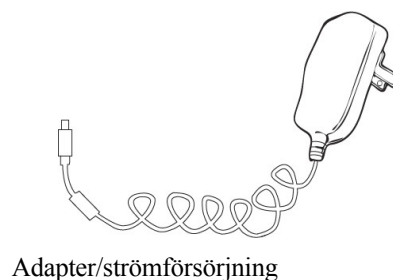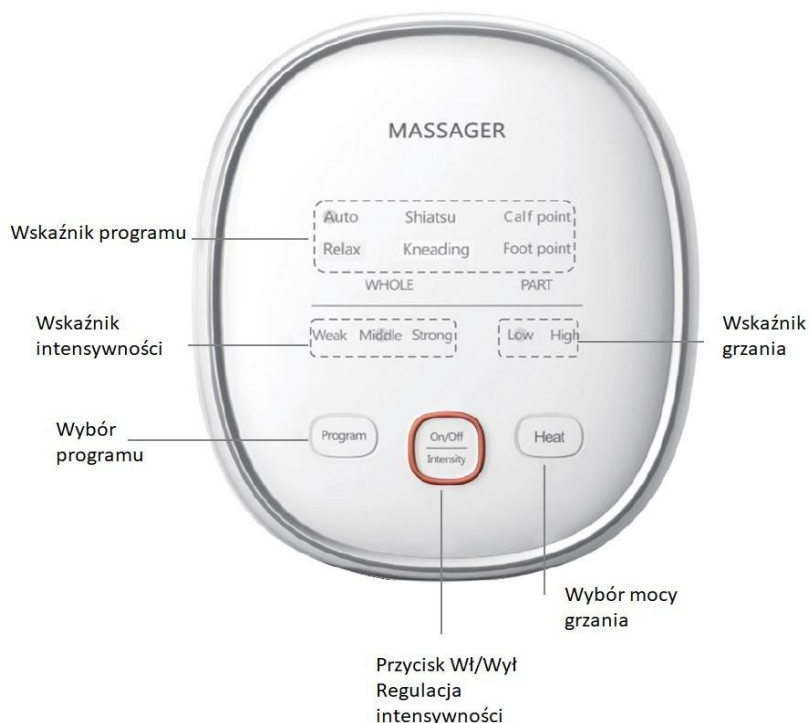



Tryck på knappen , för att slå på/stänga av apparaten(När apparaten är påslagen ställer den automatiskt in värmen på LOW och intensiteten på WEAK
När du trycker på knappen igen tänds indikatorlampan för ändring av intensitet: Svag, Medel, Stark, Av.

Värmen slås på efter 5 sekunder. Därefter kan valfritt värde ställas in.
Programknappen ändrar typ och position för massagen: Auto, Relax, Shiatsu, Kneading, Benpunkt, Fotpunkt.
Knappen Värmeprogram ändrar värmestyrkan - Låg (svag) Hög (stark).

Program				Behandling av partier	
AUTO	Knådning	Shiatsu	Slappna av	Armbåge	Pris
Inkluderar alla program Massage användningsområden luftkompression.	Knådning från från tå till vad. Användningsområden Kompression luft.	Kompressionsmassage z med hjälp av Kompression luft	Mjuk massage med med hjälp av Kompression luft	Vadmassage med med hjälp av kompressionsmassage och knådning.	Fotmassage med hjälp av kompressionsmassage och knådning.

Uppmärksamhet

Undvik direkt hudkontakt med produkten, det är bättre att använda den med höga strump
behandlingen, sitt bekvämt för att slappna av dina vadmuskler.


Instruktioner för användning

Linda om tån, fotleden och vaden ordentligt och fäst kardborrebandet ordentligt.

Anslut kontakten till enheten

Kardborrebandet kan röra sig lätt under behandlingen.

Ju tjockare strumpa, damasker, desto svagare behandlingskänsla.

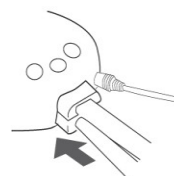

Massage

Massagetid: 10- 20 min. en gång om dagen (överstimulering av muskler och nerver kommer att ha motsatt effekt vid långvarig användning)

Förvaras:

- 1 Ta bort adaptern från kontakten, från apparaten och luftledningspluggen
- 2 Fäst kardborrebandet enligt bilden och för in luftkanalen genom att böja den något.

Uppmärksamhet

Dra inte hårt i luftslangen när du drar ut kontakten.


Böj inte kabeln från kontrollpanelen och från strömförsörjningen under förvaring

Knäck inte luft- och strömförsörjningskabeln, den kan gå sönder. Placera inte apparaten på en plats som är tillgänglig för barn.

Placera den inte på en plats med hög temperatur, hög luftfuktighet eller i direkt solljus. Lägg inte något på kontrollpanelen och linda inte in den i t.ex. folie (annars kan det bli märken eller missfärgningar).

Använd inte thinner, flyktiga oljor eller alkohol för rengöring (kan orsaka skador eller missfärgning).

Stäng av strömförsörjningen om du inte använder apparaten.


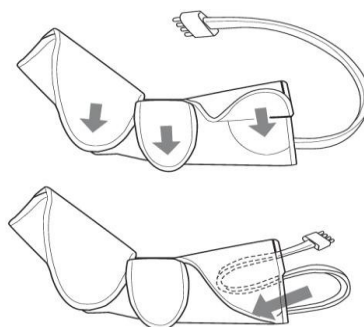


Om kardborrebandet är smutsigt, rengör det försiktigt med en tandpetare eller liknande. För inte in några föremål i luftkanalen.

Enheten får inte användas när kroppstemperaturen är förhöjd, är svag och under graviditet och efter förlossning.



Fotstorlek: ca 20 cm - 27,94 cm benstorlek: ca 20 cm - 48 cm.

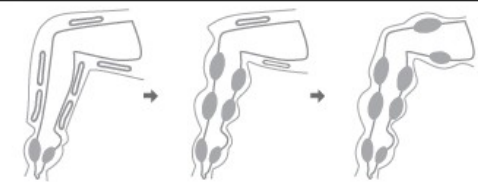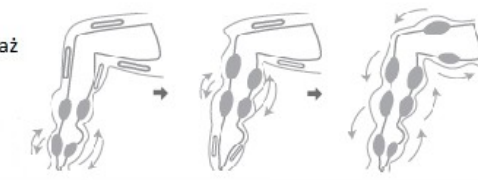	Program	Schemat masażu
Ogólne zmęczenie mięśni	Ugniatanie	Schemat działania masażu 
Rozluźnienie mięśni	Masaż	Mocny masaż 
Pierwsze użycie, Przed snaniem, po ćwiczeniach lub długim spacerze.	Relaks	Delikatny masaż 

OBS!

Personer som genomgår behandling eller har följande symtom bör rådfråga läkare innan de använder enheten.

1. Personer med pacemaker, till exempel, som är känsliga för elektriska störningar.
2. Personer med elakartade tumörer.
3. Personer med cirkulationsrubbingar i ben och fötter.
4. Personer med hjärtsjukdom.
5. Gravida kvinnor och kvinnor efter förlossning
7. Personer med nedsatt känsel på grund av störningar i den perifera blodcirkulationen, t.ex. diabetes.
8. Personer med benskörhet.
9. Skadade personer i massageutrymmet.
10. Personer med en kroppstemperatur på 38° C eller högre (med feber).
11. Patienter med trombos, svåra aneurysm, akuta venösa tumörer, olika hudinflammationer eller hudinfektioner, inklusive de som lider av inflammation i underhudsvävnaden, kan orsaka försämring av symtomen.

Kontrollera tyget före användning. * Annars finns det risk för personskador, elektriska stötar eller brännskador på grund av låg spänningstemperatur. *

Se till att du använder en AC-strömförsörjning på 100~ 240V. Om enheten inte svarar eller om du känner obehag när du använder sluta använda den, koppla omedelbart bort strömförsörjningen. Kontrollera strömförsörjningskontakten och se till att den är inkopplad. Annars finns det risk för brand och elektriska stötar.

Vid användning av värmefunktionen ska du inte röra vid apparaten under en längre tid, annars kan brännskador uppstå vid låg temperatur

Följande personer kan uppleva rodnad efter användning. Om rodnaden inte avtar efter 1 timme ska du kontakta läkare.

Bearbeta inte, böj inte för mycket, dra inte i eller vrid inte strömförsörjningskablar och ledningarna. Placera inte tunga föremål på den.

Utrustningen får inte användas i följande situationer: * Strömförsörjningen eller luftledningens kontakt är skadad. * Strömförsörjningskontakten är lös. * När luftledningskontakten sätts in i huvudenheten kan den vara lös, vilket kan orsaka brand eller elektrisk stöt, brand eller funktionsfel på grund av kortslutning....

Koppla inte in eller ut strömförsörjningen från uttaget med våta händer. Vänligen kontrollera massagetiden.

När du drar ut nätaggregatet, dra inte i kabeln utan dra ut adapterkroppen. Dra inte i luftslangen

när du kopplar bort luftslangen. Underlåtenhet att göra detta kan leda till brand, elektriska stötar eller brand. Stå eller gå inte under användning, annars kan du falla. Använd apparaten i en position som är bekväm för användaren. Annars kan den orsaka funktionsfel eller elektriska stötar. Sätt inte i eller ta ur sladden från massageapparaten med våta händer, annars kan det leda till elektriska stötar.

Dra inte ut strömförsörjningen eller koppla ur luftslangen under massagen, annars kan det orsaka kortslutning. Vira inte nätsladden runt huvudenheten eller luftslangen runt bältet när du förvarar den.

Använd inte enheten på en plats med hög luftfuktighet, t.ex. i ett badrum. Utsätt inte huvudenheten eller remmen för vatten, eftersom det kan orsaka skador på enheten eller elektriska stötar. Koppla bort nätadaptern när du tar bort den, annars kan det orsaka elektriska stötar. Koppla bort nätadaptern när den inte används. Annars kan det orsaka en elektrisk stöt.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Enheten är professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Användning av enheten endast av kvalificerad kosmetisk personal undviker oönskade effekter under behandlingen.
2. Ta inte isär apparaten och försök inte använda den för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (company).
3. Installera eller använd inte enheten i närheten av vätskor, våta områden eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i enheten.
4. Dra omedelbart ut kontakten ur vägguttaget och kontakta den auktoriserade service Pacholczyk tillhandahåller i följande fall:
 - a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.
5. Placera inte några föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på strömkabeln.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den faller.
9. För att garantera enhetens fasta livslängd rekommenderar vi att man håller ett intervall på en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns upp.

NOTER:

1. Vid skador på nätkabeln eller andra funktionsfel ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna utrustning får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och kunskap om utrustningen om övervakning eller instruktioner ges om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de associerade riskerna förstås.
3. Apparaten är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer utan tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med en elektrisk apparat kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och hanteras på rätt sätt. Förvaras oåtkomligt för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska

Elektroniskt avfall ska samlas in separat och lämnas till samlingsplatser för elektroniskt och elektriskt avfall.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför lämnas in för återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsställen

LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i originalförpackningen vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.