

ACTIVESHOP[®]

Instruktioner för användning

YOSHIDA PRO-SPRAY LCD FRÄSMASKIN



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl Rev.
A/05/2024







Den moderna YOSHIDA-fräsmaskinen är idealisk för användning i skönhetssalonger eller fotvårdsmottagningar. Det slående metallhöljet och de användbara plastelementen ger denna unika fräsmaskin ett perfekt utseende. Det robusta handtaget på ovansidan av höljet gör det enkelt att bära.

Enhetens huvud är från det välkända varumärket Marathon. Det är skapat av metallegeringar och flera plastkomponenter. Det är lätt, vibrationsfritt och passar perfekt i handen.

Den upplysta vätskebehållaren har en volym på 250 ml. Den är mycket lätt att ta bort, rengöra och fylla på. Vätskan matas in i en slang som är ansluten till den andra sidan. Sprayen som är ansluten till huvudet är lättåtkomlig när behandlingen utförs. Justera sprayens intensitet med hjälp av ratten. Slå på eller av sprayen med hjälp av knappen på displayen.



Detaljer om förpackningen

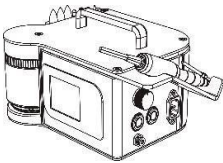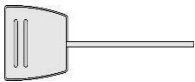Element	Ritning	Produktnamn	Yoshida LCD	Pro-Spray
Bas Fräsmaskin er		Modell	M0108	
		Spänning nominell	AC. 100-120V ~	
			AC. 200-240V ~	
Huvud		Nominell frekvens	50/60 Hz	
Strömkab el		Nominell effekt	15 W	
Fotkontrol l		Netto vikt	6,8 kg	
		Bruttovikt	7,5 kg	
Instruktion er för användning		Hastighet	10000 ~ 40000 VARVTAL	

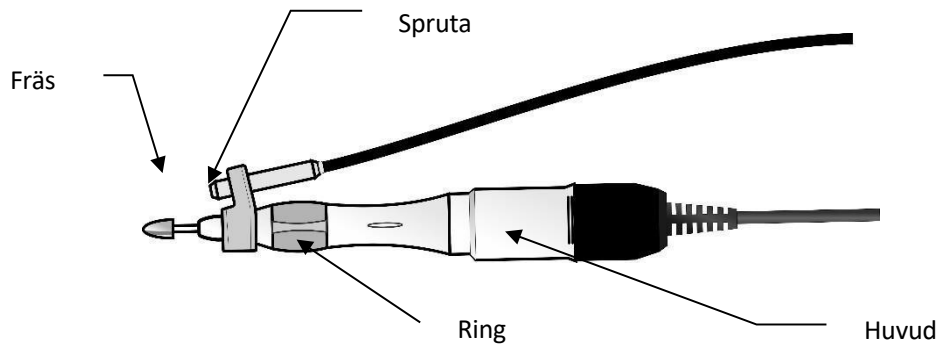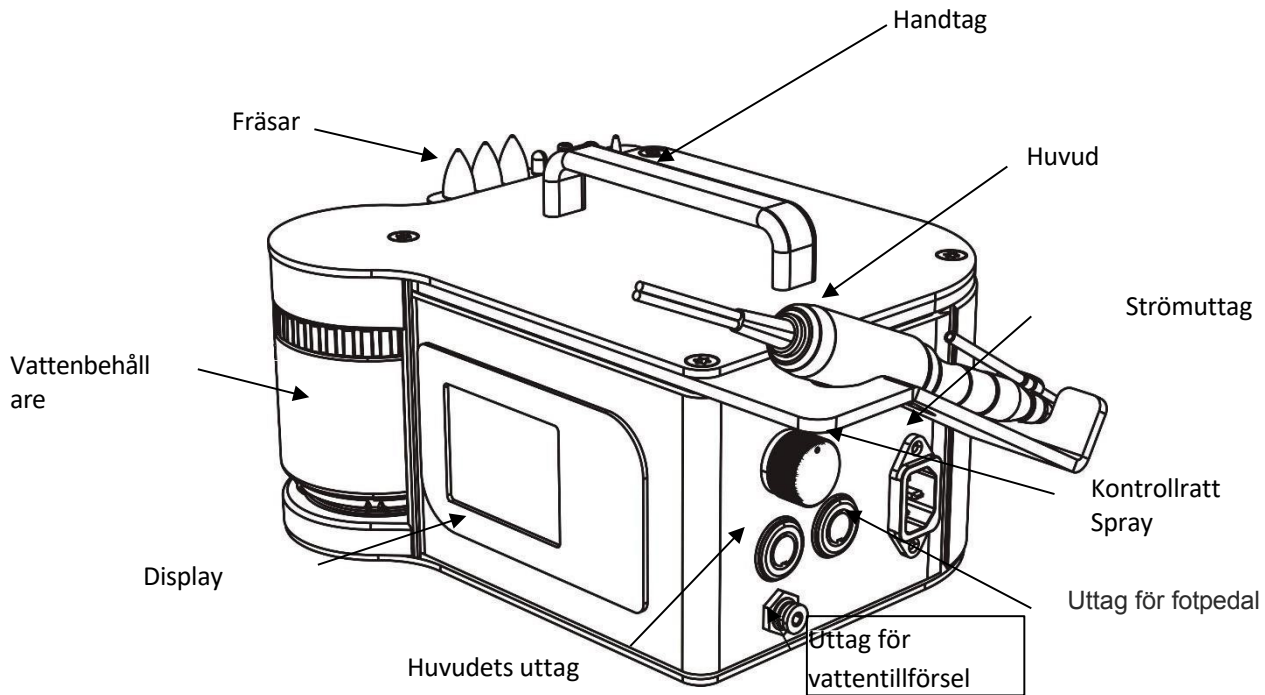

Förberedelser före användning


1. Vrid ringen ett halvt varv enligt pilen på ritningen.
2. För in skäret hela vägen in.
3. Vrid ringen (enligt pilen på bilden) för att låsa fast fräsen ordentligt.
4. Anslut huvudkontakten till rätt uttag på fräsens bas och vattenslangen till vattenuttaget.

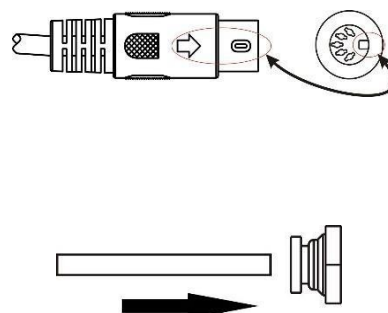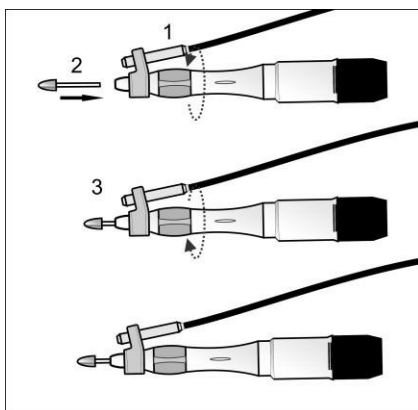


5. Ta bort behållaren enligt pilen i bild 1, skruva av locket och häll i lämplig mängd vatten, dock inte mer än till "max"-läget. Dra sedan åt locket.

Se till att locket är ordentligt åtdraget. Om locket inte dras åt kan fräsmaskinen skadas.

Sätt sedan in behållaren i fräsmaskinens bas. Se till att fliken i locket träffar skåran i fräsmaskinens bas (bilden nedan).

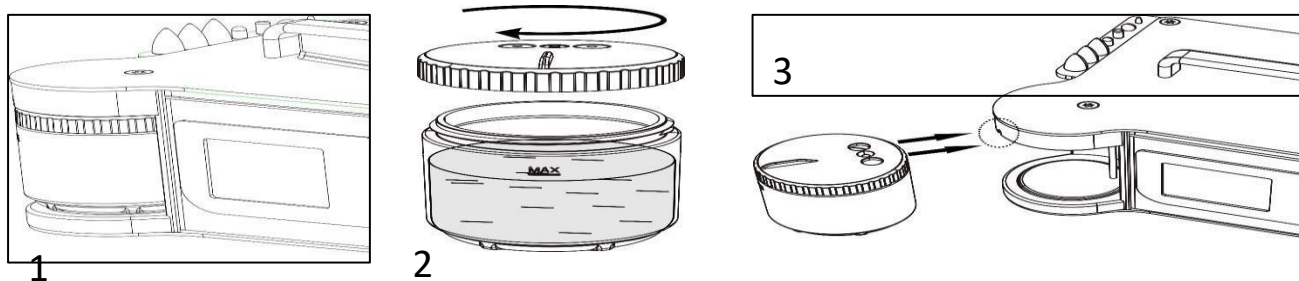


6. Anslut enheten till eluttaget.

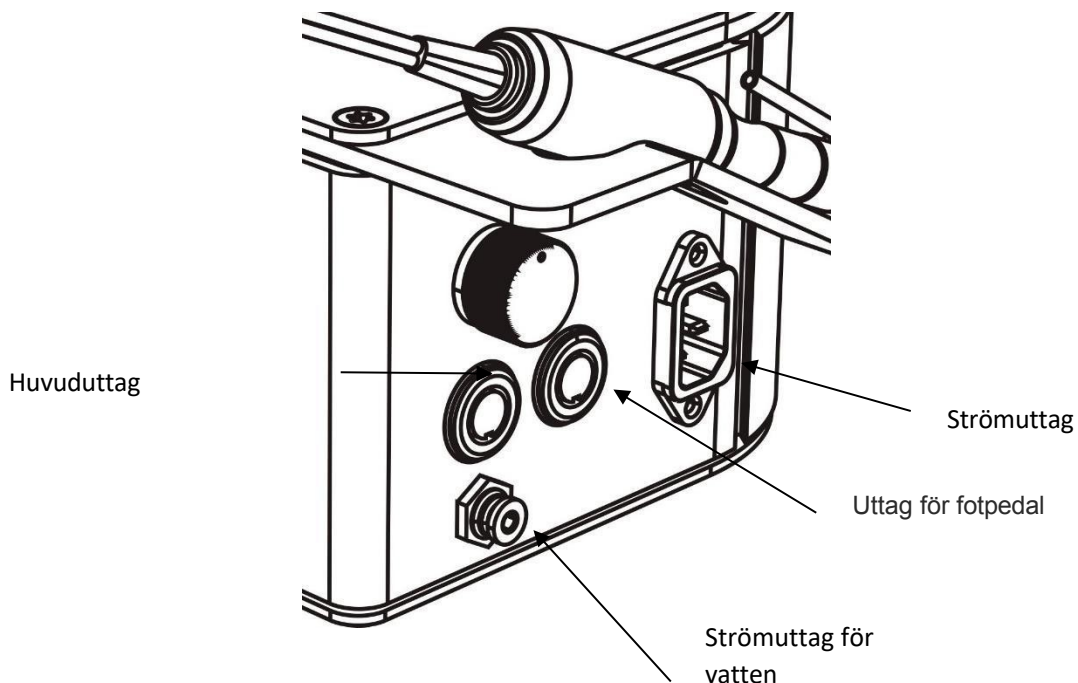

Tryck på POWER-knappen för att starta routern.

Fräsmaskinen startar med det fabriksinställda varvtalet 15.

I detta läge kan du starta fräsen med knappen "Start / Paus", genom att trycka på "■" på displayen eller med fotpedalen.

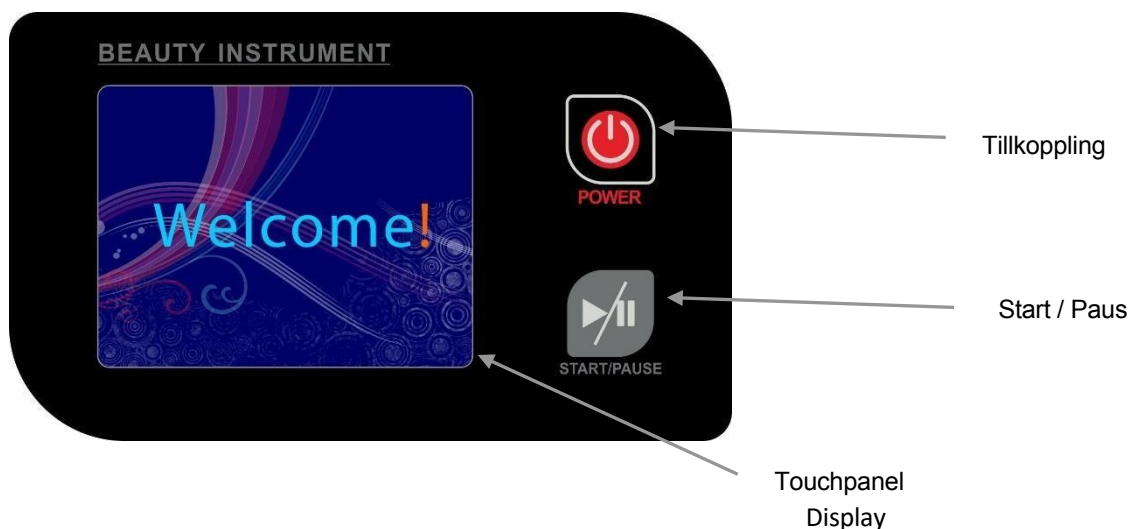

Displayinställningar:



Hastigheten kan justeras i standby-läge eller under användning. Justeringen fungerar på ett intervall mellan 10 och 40. För att ställa in önskad hastighet, tryck på "▶" eller "◀".



Knapp för att ställa in och spara individuella användarinställningar: klicka och ange parameterinställningar.



Ange och spara användarinställningar: med den här funktionen kan du spara 6 typer av inställningar med olika hastighetsinställningar och rotationsriktning samt aktivera sprayfunktionen.

Användarmanual:

1. Välj de sparade användarinställningarna:

Tryck på **M1**, för att komma till valet av arbetsprogram, M1-M6 visas.

Tryck en gång på **M1**, färgen ändras till orange **M3**, vilket indikerar att ett sparat program har valts.

Klicka sedan på returknappen  i det högra hörnet, så visas de sparade arbetsparametrarna på displayen.



2. Spara användarinställningar:

Tryck på **M1** för att välja arbetsprogram, på displayen visas M1 från användarinställningarna.

Tryck en gång på **M3**. Ställ sedan in driftsparametrarna . Klicka sedan på knappen

Spara i det nedre högra hörnet . Färgen ändras till blå

M3 vilket visar att arbetsparametrarna har sparats. Klicka sedan på knappen Return  i gränssnittets högra hörn.



Huvudets rotationsriktning: du kan välja rotation medurs eller moturs




Sprutväljarbrytare - på / av

Animerat visningsfönster: visar hur routerhuvudet fungerar, genom att klicka på fönstret startar eller pausar du driften.



Instruktioner för användning:



1. Ta på dig fräsmaskinens huvud.
2. Konfigurera inställningarna, riktningen, kontrollera om du kan spruta eller välj ett lämpligt program.
3. Tryck på sprutknappen, ställ in vattensprutans effekt med sprutreglaget.
4. Starta fräsen med START/PAUSE-knappen, på displayen genom att trycka på "||" eller med fotpedalen.
(Obs: först kommer tryckluft ut ur sprayen och efter ca 10 sekunder kommer vatten att spruta).
5. Applicera försiktigt skäraren på nageln. Sprayen sköljer bort det nageldamm som bildas. Justera storleken på vattenstrålen med ratten under arbetets gång. Använd skyddsglasögon när du använder skäraren.

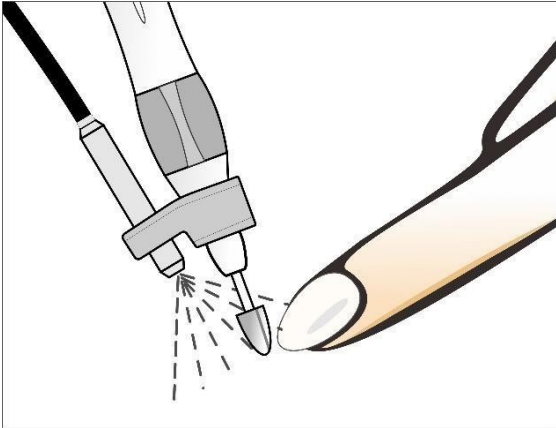

Systeminställningar

1. Ändra lösenord

Slå på strömmen, driftskärmen visas och tryck sedan på pausknappen i 3 sekunder. En inställningspanel visas på displayen enligt följande

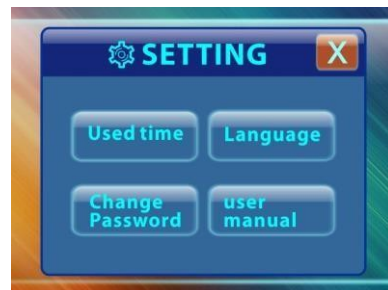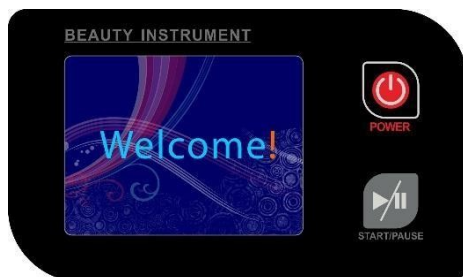



Tryck på **Change Password** och ange det gamla lösenordet. Systemet visar en ruta för att ange ett nytt lösenord (om lösenordet inte är korrekt visas en lösenordsprompt)





Ange det nya lösenordet och du uppmanas att bekräfta lösenordet. Om ett felaktigt lösenord anges två gånger måste du ange det nya lösenordet igen. Lösenordet måste bestå av 4 siffror.

Kontrollera drifttiden:

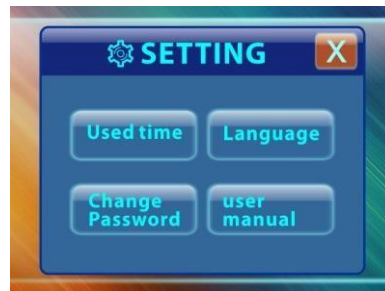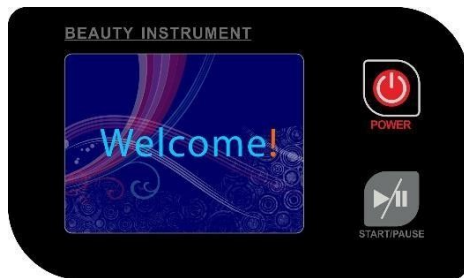

Du kan kontrollera den totala drifttiden för enheten genom att hålla in START/PAUSE-knappen i 3 sekunder.

Inställningspanelen visas, klicka på



för drift.



, kommer att visas visas total tid



För att återställa den totala drifttiden till noll, tryck på

lösenord. När lösenordet har angetts nollställs drifttiden.

, kommer att visas visas fältet för att ange ett

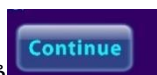
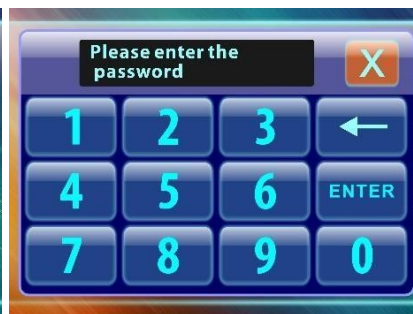


Tryck på , för att återgå till inställningarna utan att nollställa drifttiden. Om fel lösenord anges måste lösenordet anges på nytt.



Välja språk




Slå på strömmen, driftskärmen visas och tryck sedan på pausknappen i 3 sekunder. Displayen visar inställningspanelen enligt nedan

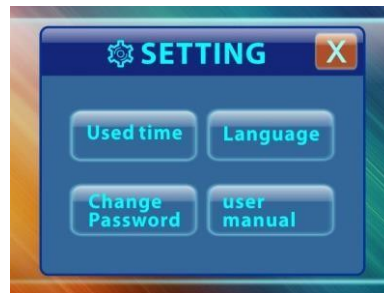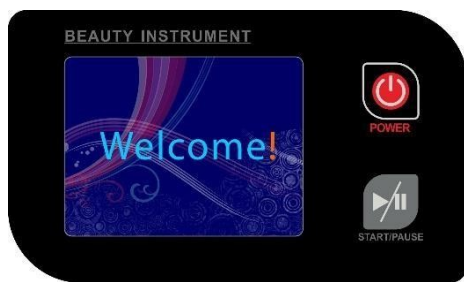

Klicka på  så visas inställningspanelen. Välj önskat språk.



Slå på fräsmaskinens bas. När meddelandet - Välkommen! - visas trycker du på START/PAUSE-knappen i 3 sekunder. Inställningspanelen kommer att visas.

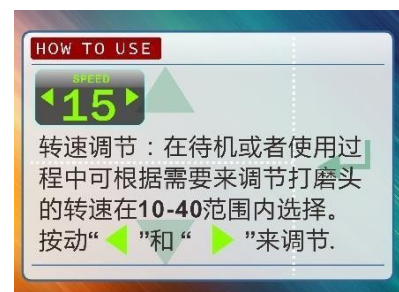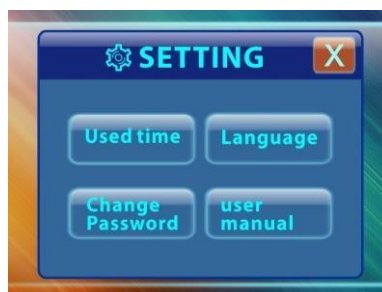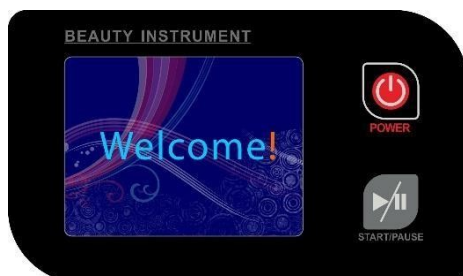

Klicka på , så visas instruktionsmenyn. Var uppmärksam:

1. Innan du slår på routerbasen ska du ansluta huvudet tillsammans med den monterade fräsen.
2. Montera inte delar som inte passar till maskinen.
3. Använd den på avsett sätt.
4. Undvik att överbelasta maskinen, och kör i synnerhet inte med högsta hastighet under en längre tid. I annat fall kan huvudet skadas.
5. Använd inte i närheten av barn.
6. Håll ditt arbete rent.
7. Tryck på fräsen med tillräcklig kraft. Överbelastning av fräsmaskinen kan leda till skador på maskinen.

8. Undvik att av misstag starta fräshuvudet utan att fräsen är monterad.
9. Rör inte maskinen när den börjar arbeta.
10. Håll maskinen borta från vatten och eld.
11. Använd inte maskinen i fuktiga utrymmen.
12. Använd skyddsglasögon.
13. Stäng av strömmen när du har avslutat arbetet för att garantera säkerheten.

Lösning på vanliga problem:


Nr.	Beskrivning av problemet	Orsak till felet	Metod för att åtgärda problemet	Lösning på problemet
1	Fräsmaskinens bas startar inte (reagerar inte på POWER-knappen) trots att nätkabeln är ansluten. Nätkabeln är ansluten.	Ingen strömförsörjning	1. Kontrollera säkringen. 2. Kontrollera att strömkabeln Strömförsörjningskabeln är ansluten.	1. Säkringen har gått, måste bytas ut. 2. Anslut nätkabeln igen.
2	Om enheten stängs av vid förflyttning eller inte går att starta.	Kontrollera nätkabelns anslutning.	1. Kontrollera att kontakten på nätkabeln är ansluten; 2. Kontrollera att nätkabeln inte är skadad Nätkabeln är inte skadad	1. Anslut återanslut nätkabeln 2. Om nätsladden är skadad ska den bytas ut på en professionell verkstad servicecenter.
3.	Trots att du trycker på START/PAUSE-knappen trycks in eller via fotpedalen, går fräsmaskinen inte svarar inte.	Defekt huvud Problem med utmatningsuttaget	Kontrollera huvudets anslutning, kontrollera att det inte är skadat huvudet självt	1. Byt ut det skadade huvudet. 2. Låt en professionell serviceverkstad reparera enheten servicecenter.

Bruksanvisning för huvudet

1. Funktioner

- Dammskydd är monterat på insidan för att förhindra att damm tränger in i maskinen
- Högteknologisk precisionsspindel för smidig och vibrationsfri drift.
- Huvudet är lämpligt för desinfektion i autoklav vid temperaturer upp till 135 °C.
- Huvudet är lämpligt för alla motorer av E-typ.

2. Montering av avskärare

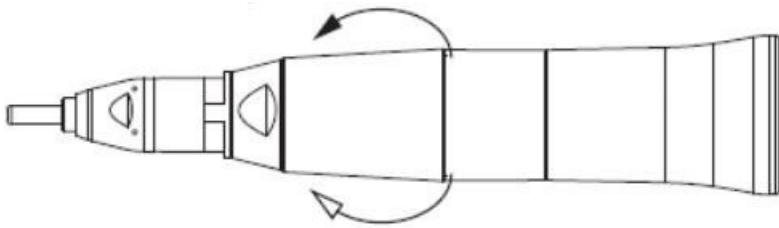

Vrid skärets låsring i riktning mot den svarta pilen för att öppna klämman. För in skäret i klämman

3. Underhåll

Använd Panaspray underhållsvätska för fräsmaskiner eller alkoholfritt desinfektionsmedel för att underhålla huvudet.

TIPS FÖR ATT MAXIMERA LIVSLÄNGDEN PÅ FRÄSEN:

- Använd inte böjda eller skadade fräsar.
- Överbelastning som orsakas av skadade fräsar förstör snabbt kullagren.
- Tvätta skären före användning, om fett eller andra ämnen gör att de fastnar på spindeln, genom ett smutsigt skär, kan detta orsaka vibrationer, dålig spindeleffekt eller andra oregelbundenheter.
- Sätt alltid in fräsen hela vägen in i klämman

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning vid kosmetiska operationer. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Enheten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta ACTIVESHOP Ltd.:s auktoriserade serviceverkstad i följande fall
(a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut strömkabeln ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med apparaten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Apparaten kan skadas om den tappas.
9. För att garantera apparatens angivna livslängd rekommenderar vi att du håller ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på typskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med brinner upp.

FÖRSIKTIGHET:

1. Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra fel, kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och personer utan erfarenhet och kunskap om utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår riskerna.

3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten oövervakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till dödsfall, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall begagnade elektriska och elektroniska begagnade elektriska apparater

måste elektrisk utrustning samlas in separat och lämnas till samlingsställen för begagnad elektronisk och elektrisk utrustning.

När de gamla apparaterna är uttjänta innehåller de också komponenter som är helt återvinningsbara och ska därför lämnas in för återvinning. De ska lämnas till lämpliga samlingsställen och kan även lämnas till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i originalförpackningen vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat rum med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur från (+) 10 °C till (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.

