

ACTIVESHOP[®]

BRUKSANVISNING

Giovanni D-09 Vapozone

Modell: DT-8228 Vit



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud.
DC2A 54-610 Wrocław,
Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/04/2025

Skanna
för olika
språk



Multifunktionell vaposon Giovanni D-09 med varm ånga och ozon.

Vapozonen är monterad på ett höjdjusterbart stativ, vilket gör det mycket enklare att utföra behandlingar. Ångan som avges från apparaten öppnar tilltäppta porer, möjliggör djuprengöring av huden, syresätter huden och renar den från toxiner. Behandlingen förbättrar också blodcirkulationen.


Enhetens effekt:

1. Mjukar upp huden,
2. Desinficerar porerna,
3. Vidgar porerna,
4. Stimulerar blodcirkulationen till huden,
5. Underlättar avlägsnandet av pormaskar och död hud,
6. Återfuktar och fräschar upp huden,
7. Förbättrar hudens tillstånd.

Tekniska data

Spänning	220-240V
Effekt	850W
Nominell frekvens	50/60 Hz
Vattenbehållarens kapacitet	600 ml
Ångans temperatur	Cirka 40°C
Vikt	4 kg

Apparatens mått

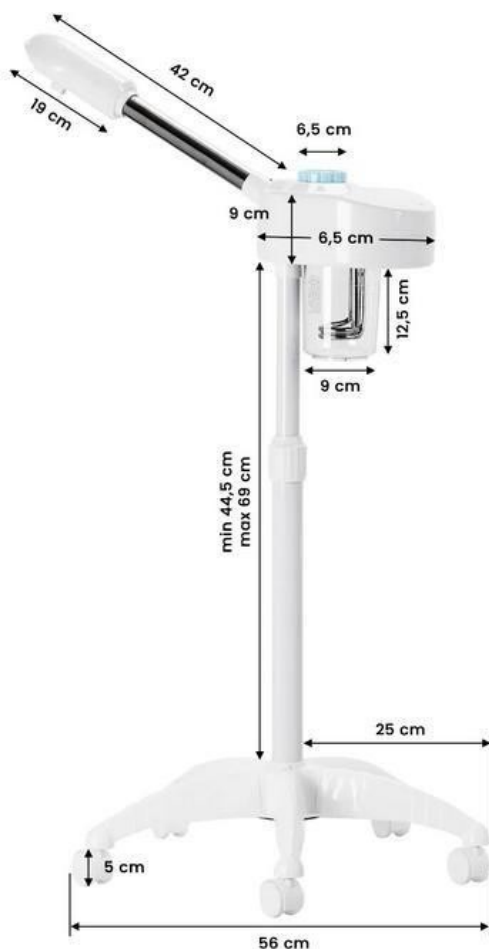

Förberedelser:

1. Ta bort alla förpackningsdetaljer innan du använder förångaren.
2. Placera apparaten i det område där den ska användas. Företrädesvis på en plan och stabil yta.
3. Skruva loss vattenbehållaren och fyll den med rent, helst filtrerat vatten. Skruva sedan fast locket ordentligt.
4. Anslut apparaten till en lämplig strömkälla.
5. Håll HOT-knappen intryckt en lång stund för att slå på apparaten.
6. Enheten piper (surrar) om det inte finns något, förorenat eller otillräckligt vatten.
7. För att starta behandlingen med het ånga fyller du vattentanken helt och håller HOT-knappen intryckt. Värmaren börjar värma upp vattnet och efter några minuter avges het ånga. Håll in HOT-knappen igen för att avaktivera denna funktion.
8. För att aktivera ozonfunktionen håller du LIGHT-knappen intryckt en längre stund. Ozonet aktiveras och mängden ånga ökar.
ångmängden ökar. Håll in knappen igen för att avaktivera funktionen.



9. Huvudet på förångaren kan vridas fritt.

Anvisningar för användning av apparaten:

1. Håll munstycket ca 20 cm från ansiktet för att undvika brännskador.
2. Ångan börjar komma ut några tiotals sekunder efter att apparaten har slagits på och värmts upp.
3. Om det inte finns tillräckligt med vatten kommer ångproduktionen gradvis att minska. Apparaten stängs av om det inte finns tillräckligt med vatten.
4. Ta inte bort vattenbehållaren omedelbart efter avstängningen. Vänta ca 10 minuter tills behållaren har svalnat. På så sätt undviker du eventuell skällning.
5. Om apparaten stängs av automatiskt på grund av vattenbrist ska du vänta i ca 2 minuter tills kontrollampan återställs och apparaten är klar att användas igen.
6. Övervaka vattennivån under behandlingen och fyll på tanken om vattennivån når miniminivån.

FUNKTIONER:

1. Enheten stängs av automatiskt när vattennivån i tanken är otillräcklig.
2. Apparaten producerar varm ånga.
3. Apparaten har en "ozon"-funktion.

OBSERVERA!

Överdriven användning kan vara skadlig för huden. I början bör apparaten endast användas en gång om dagen, i högst 10 minuter. Använd 2-3 gånger i veckan för normal hud och en gång i veckan för känslig hud.

OBS!

Håll inte eteriska oljor eller någon annan vätska än vatten i vattentanken. Detta kan leda till skador på apparaten eller till kroppsskada.

Rekommendationer:

1. Det är förbjudet att använda apparaten i närheten av badkar, handfat eller andra våta kärl. Använd eller förvara inte apparaten i badrummet eller i andra rum med hög luftfuktighet. Detta kan leda till elektriska stötar, brand eller skador på isoleringen. Doppa inte
sänk inte ner apparaten i vatten.
2. Apparaten får inte användas av personer som har problem med värmekänslan. Den kan
kan orsaka brännskador.
3. Vi rekommenderar att du omedelbart slutar använda apparaten om du får smärtor eller
eller avvikelser på huden eller kroppen.
4. Kontraindikationer för att använda produkten:
 - Graviditet, menstruation, hormonella störningar,
 - Allergier, hudsjukdomar, atopisk dermatit, mycket känslig hud eller solbränd hud,
 - Hudskador, eksem, svullnader etc,
 - nyligen genomförda kirurgiska ingrepp.
5. Rör inte vid stickkontaktens metalldelar när du ansluter den. Stäng av strömmen och dra ut
stickkontakten ur uttaget när du inte använder apparaten.
6. Rengör apparaten med jämna mellanrum för att förhindra dammbildning. Fukt och andra faktorer kan
leda till att isoleringen punkteras. Förhindra att damm eller andra skadliga ämnen tränger in i
stickkontakten.
7. Vira inte nätsladden runt apparaten, det kan leda till att sladden inte fungerar som den ska. Använd inte
apparaten om sladden eller kontakten är varm eller skadad, eller om kontakten sitter löst i uttaget.
8. Se till att apparaten får ström från en källa med rätt spänning. Se till att stickkontakten är ordentligt
ansluten till vägguttaget. Om så inte sker kan det leda till brand, elektriska stötar eller brännskador.
Apparaten får inte anslutas till eller kopplas bort från uttaget med våta eller fuktiga händer. Sladden får
inte ändras, sträckas, böjas eller vridas för mycket. Inget tungt får placeras på sladden.
9. Låt inte barn använda apparaten.
10. Använd inte apparaten i närheten av lättantändliga ämnen som alkoholer, lösningsmedel, bensin,
aerosoler etc. Detta kan leda till explosion eller brand.
11. Slå eller kasta inte apparaten. Om apparaten skadas till följd av slag eller fall kan den inte användas i
fortsättningen.
12. Stick inte in något i munstycket och kläm inte på munstycket, eftersom det kan leda till elektriska
stötar. Försök inte att demontera eller reparera utrustningen. Kontakta den återförsäljare som du köpte
apparaten av eller en auktoriserad serviceverkstad för reparationer.
13. Rör inte vid vattentanken när apparaten är påslagen.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning i skönhetssalonger. Om apparaten endast
används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade effekter under behandlingen undvikas.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning.
All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP
Ltd.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till
att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta ACTIVESHOP Ltd:s auktoriserade
serviceverkstad i följande fall
 - (a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud,
 - c) strömkabeln har skadats, d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten på en plats där någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur uttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen, dra ut kabeln
ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.

9. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att man väntar en minut innan man trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).

10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. I fall av skada på nätkabeln eller andra funktionsfel, kontakta en auktoriserad auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviks alla faror.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och som saknar erfarenhet av och förtrogenhet med utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Apparaten är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.



KASSERING AV APPARATEN

Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG

utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska samlas in separat och lämnas till samlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter.

Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och bör därför lämnas till återvinning. Därför ska de lämnas till lämpliga samlingsplatser samt till ACTIVESHOP Ltd.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Apparaten får endast transporteras i temperaturer mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C i sin originalförpackning. Förvara apparaten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska agenser.