

ACTIVESHOP®


BRUKSANVISNING

Azzurro 708A elektrisk kosmetisk stol



Importör:

ACTIVESHOP Sp. z o.o.
Ul. Graniczna 8b, bud. DC2A
54-610 Wrocław, Polen
www.activeshop.com.pl
Rev. A/05/2024

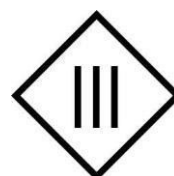


Innan du använder kosmetikstolen ska du läsa instruktionerna och utföra följande steg:

1. Se till att allt förpackningsmaterial har tagits bort.
2. Kontrollera att stolen är i funktionsdugligt skick.
3. Placera den kosmetiska stolen på den plats där den ska användas.
4. Koppla in nätkontakten i ett lämpligt uttag.


Obs! Barn och oerfarna personer får inte använda denna apparat. Barn måste hållas under uppsikt och får inte leka i närheten av kosmetikstolen.

Enhetens mått:

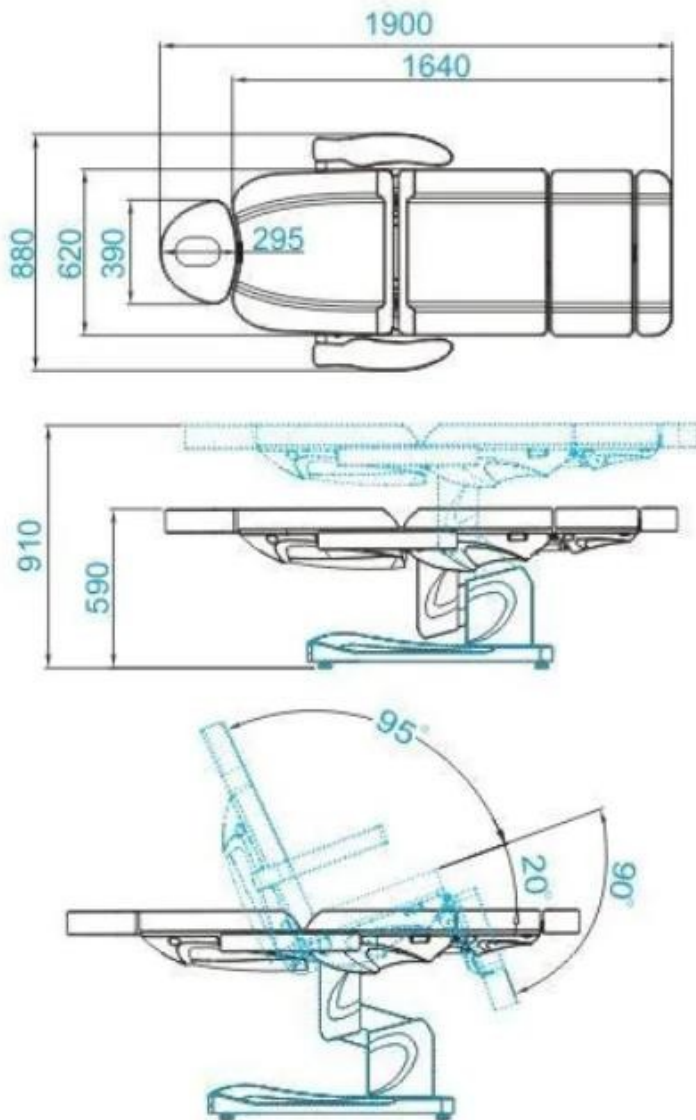

Maximal belastning på stolen: 140 kg

Enhetens konstruktion:

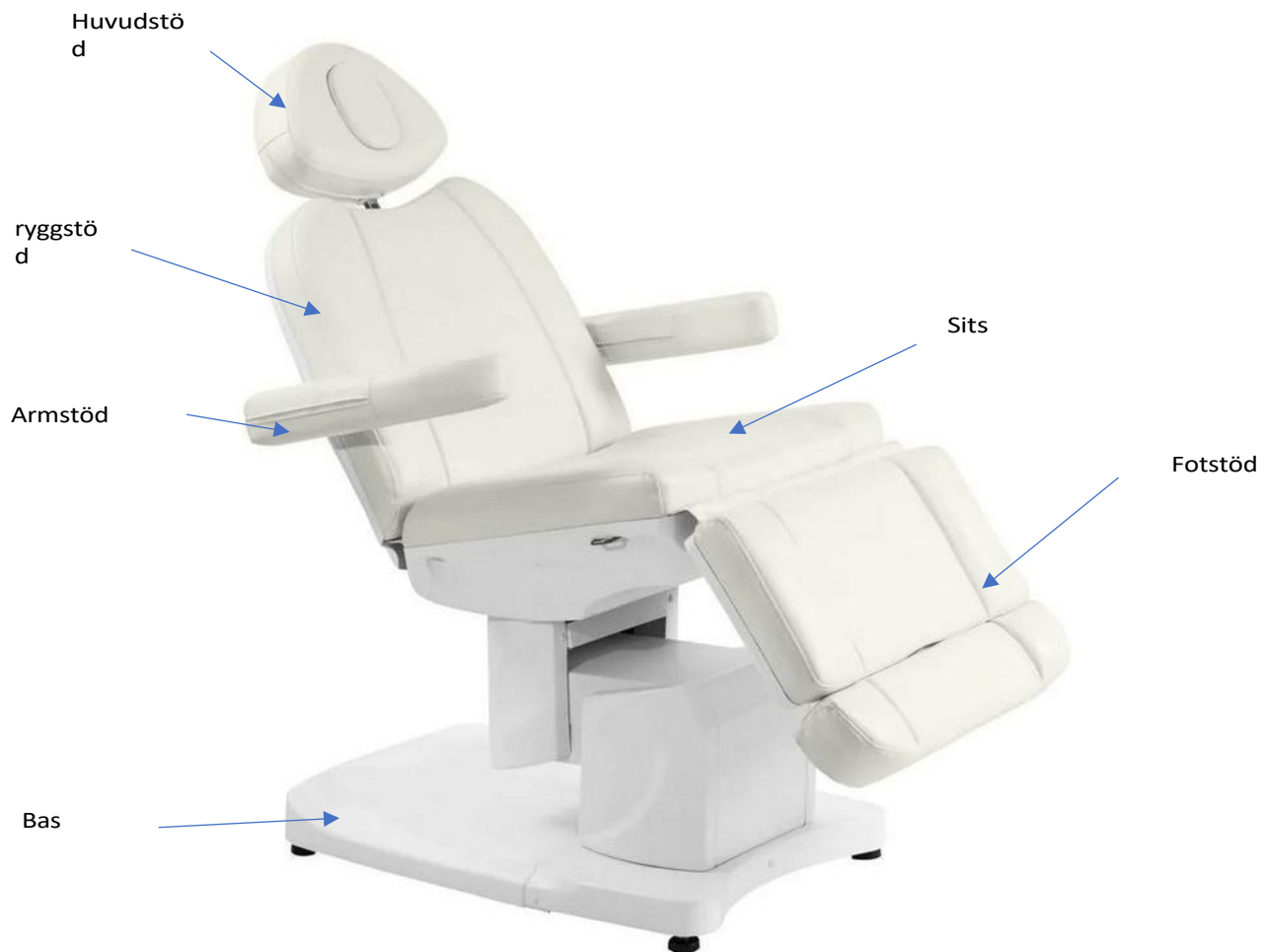

Användning av anordningen:

Sitsen är justerbar med hjälp av fjärrkontrollen, med vilken du kan justera sitsens höjd, ryggstödet och fotstödet lutning samt ställa in sitsen i vaggläge.


1. Anslut nätsladden till den externa strömförsörjningen 110V~240V.

Montering av nackstöd


För att montera huvudstödet ska du skjuta in det i rätt öppning på ryggstödet ovansida. När du har placerat huvudstödet i rätt höjd drar du åt ratten så att huvudstödet sitter fast ordentligt. För att sänka huvudstödet, skruva loss vredet något, sänk huvudstödet och dra åt vredet.

Montering av armstöd

Skjut in armstödet i hålet som finns på sidan av ryggstödet. Armstödet ska sitta ordentligt fast. Vrid det medurs eller moturs så att det sitter ordentligt på plats.

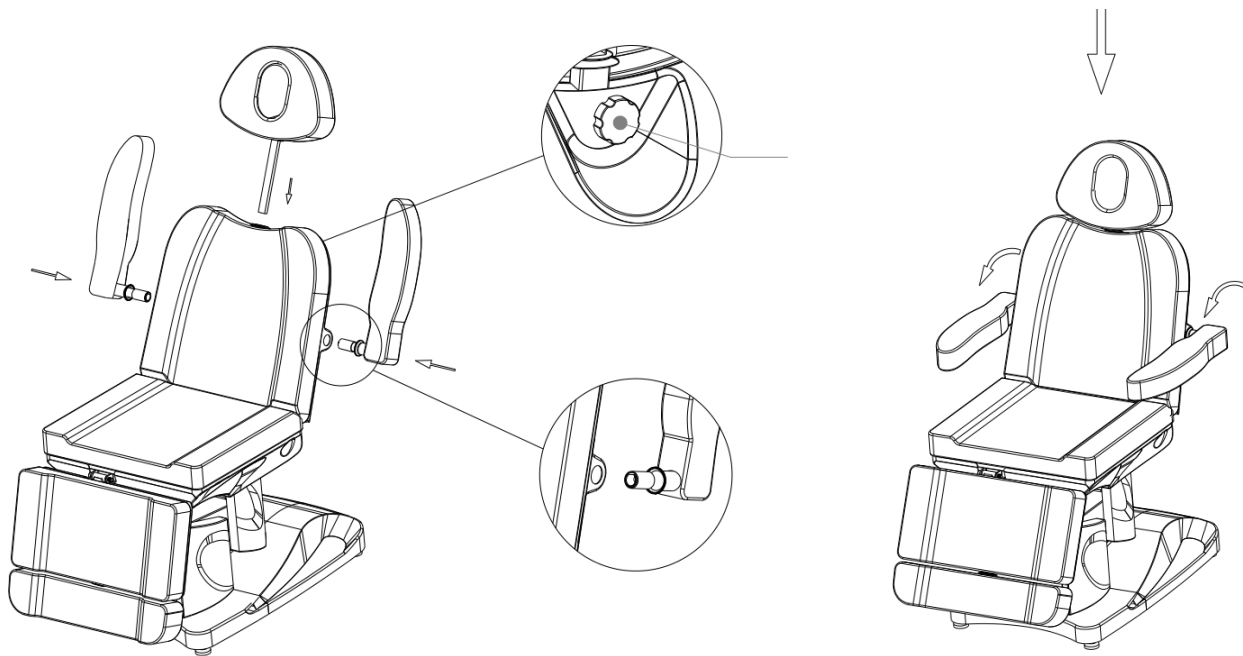

Fjärrkontrollens funktioner:

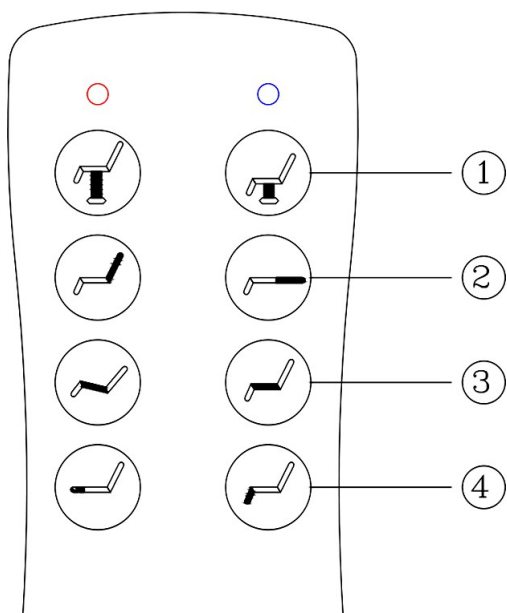

1. Tryck på  för att höja sitsen eller på  för att sänka sitsen.


2. Tryck på  eller  för att justera ryggstödsvinkeln.

3. Tryck på  eller  för att justera sitsvinkeln.

4. Tryck på  eller  för att justera fotstödet vinkel.


Justera sitsens höjd:

Tryck på  för att höja sitsen (som är i lutningsläge). Knappen  sänker sätet.

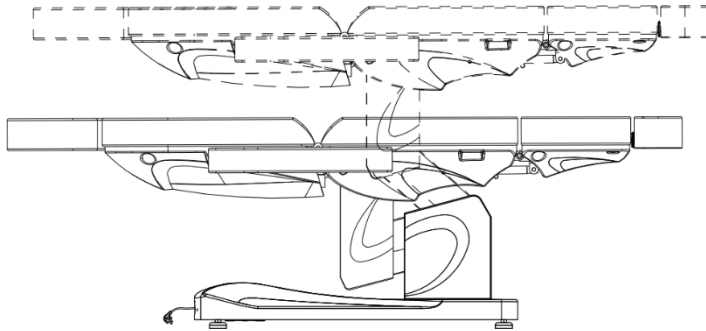


Justera ryggstödet:

Tryck på  för att ställa in ryggstödet i sittande läge eller höja det, eller på  för att sänka ryggstödet (t.ex. till ett lutande läge).

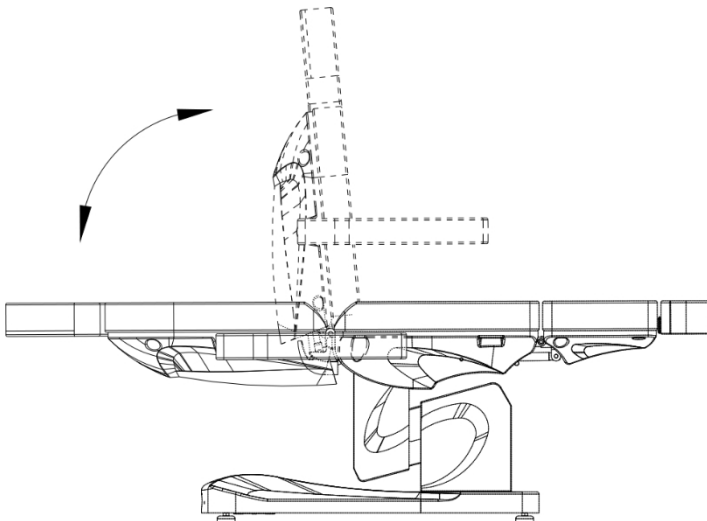

Justera sätesvinkeln:


Tryck på  eller  för att justera vinkeln på sitsen.

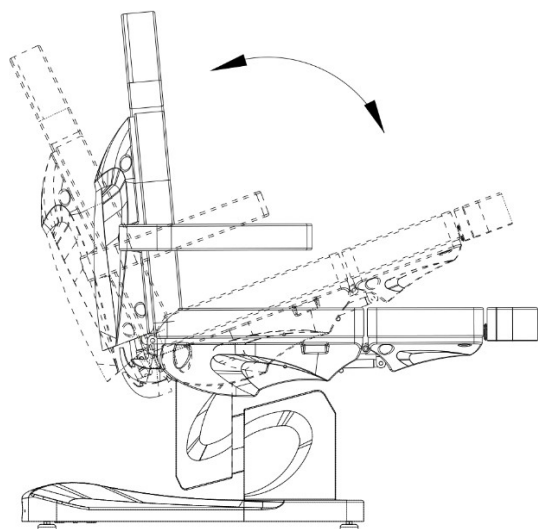

Justera fotstödet:



Tryck på  för att ställa fotstödet i vågrätt läge (eller höja det), eller fotstödet.

 för att sänka

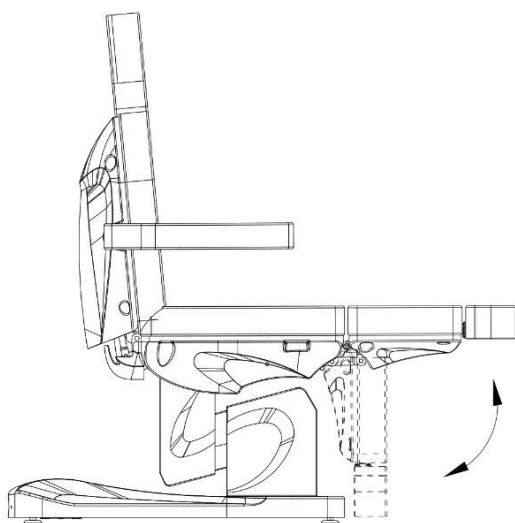

Justera fotstödet:

Lossa på ratten längst ned på fotstödet och förläng det till rätt längd, dra sedan åt ratten.

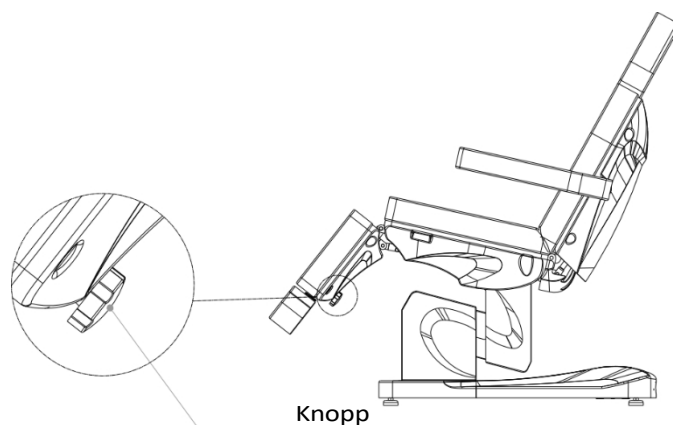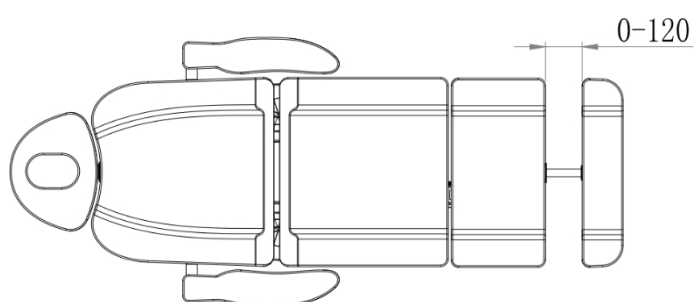

Rengöring och desinficering av enheten:

- Koppla bort apparaten från strömförsörjningen före rengöring.
- För att hålla stolens yta i gott skick måste den rengöras regelbundet. Kom ihåg att rengöra och desinficera stolen efter varje användningstillfälle. Vi rekommenderar att du utför en grundlig desinfektion en gång i månaden.

I Metall- och plastytor

- Rengör ytor och reglage av metall och plast genom att torka av dem med en fuktig trasa. En liten borste fungerar bra för att rengöra svåråtkomliga områden eller hörn. Använd inte för mycket vätska för att rengöra apparaten. Desinficera sedan apparaten med en lämplig vätska.

II Ytor av rostfritt stål

- Rengöring med ett mildt rengöringsmedel fungerar bäst. Ammoniak och de flesta lösningsmedel kan användas för att ta bort svåra fläckar. Undvik klorbaserade lösningar.

III Målade eller förkromade metallytor

- Använd inte vattenstrålar (duschar, högtrycksvattenkanoner) för rengöring.
- Rengör inte vid höga temperaturer och hög luftfuktighet, och utsätt inte enheten för förhållanden som kan leda till vätskekontaminering.
- Använd inte lösningsmedel eller syror för rengöring.

IV Stolens yta

- Torka av sitsens yta jämnt med ett speciellt läderrengöringsmedel och torka sedan av den med en ren, mjuk trasa.

Underhåll

Apparaten måste kopplas bort från strömförsörjningen före underhåll.

1. Reparationer ska utföras av erfaren och av tillverkaren auktoriserad personal. Reparationer som utförs av obehörig personal kan orsaka personskador eller skador på apparaten som tillverkaren inte ansvarar för.
2. Använd endast originalreservdelar som godkänts av tillverkaren.
3. Använd inte den elektriska skönhetsstolen eller tillbehören om de inte fungerar som de ska. Allt underhålls- och reparationsarbete måste dokumenteras.

Felsökning

Problem	Orsak till problemet	Metod för lösning
Knapparna på fjärrkontrollen svarar inte.	1.Strömbrytare strömstyrning aktiveras eller aktiveras inte. 2.Sätet kan vara redan i sitt maximala läge. 3.Apparaten är inte ansluten till strömförsörjningen.	1. Försök att slå på och av den. 2. Kontrollera att de andra knapparna fungerar. 3. Kontrollera att apparaten är ansluten till elnätet. Om så inte är fallet, koppla då in den.
Enheten ger ifrån sig konstiga ljud när den höjs och sänks.	Skruven har lossnat.	Kontrollera i dra åt alla skruvar.
Lampan tänds inte trots att strömbrytaren är påslagen.	Bränd säkring.	Byt ut säkringen.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten är en professionell utrustning för användning inom kosmetisk kirurgi. Om apparaten endast används av kvalificerad kosmetisk personal kan oönskade följder under behandlingen undvikas.
2. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Sp. z o.o.).
3. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kommer in i apparaten.
4. Dra omedelbart ut stickkontakten ur eluttaget och kontakta den auktoriserade serviceverkstaden som tillhandahålls av ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall:
 - a) vätska har trängt in i apparaten, b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, c) nätsladden har skadats, d) apparaten har välts eller dess hölje har skadats.
5. Placera inga föremål på kablarna. Installera inte enheten så att någon kan trampa på nätsladden.
6. Av säkerhetsskäl ska du dra ut nätsladden ur uttaget varje gång du avslutar arbetet med enheten.
7. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut kabeln ur uttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
8. Placera inte enheten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Apparaten kan skadas om den faller.
9. För att garantera en lång livslängd för apparaten rekommenderas ett intervall på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
10. Strömförsörjningen måste överensstämma med specifikationerna på märkskylten. Annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, skadas eller till och med bränns ut.

FÖRSIKTIGHET:

1. Om nätsladden skadas eller om det uppstår andra **f u n k t i o n s f e l** ska du kontakta en auktoriserad serviceverkstad - på så sätt undviker du fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och brist på erfarenhet och förtrogenhet med utrustningen, om övervakning eller instruktioner ges om hur man använder utrustningen på ett säkert sätt så att de associerade riskerna förstås.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.
4. Lämna inte apparaten obevakad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska apparat är inte en leksak. Felaktig användning eller kontakt med den elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, och därför ska apparaten användas och förvaras utom räckhåll för barn.

KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, armaturer och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsbestämmelserna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktiv 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter måste begagnad elektrisk utrustning samlas in separat och lämnas till följande insamlingsplatser

insamlingsanläggningar för begagnad elektrisk och elektronisk utrustning. Uttjänta och gamla apparater innehåller komponenter som är helt återvinningsbara och ska därför lämnas till

dem för upparbetning. Därför ska de lämnas till lämpliga insamlingsställen och till ACTIVESHOP Ltd.

LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten får endast transporteras i originalförpackningen vid en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C. Förvara enheten i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.