



# SU.16

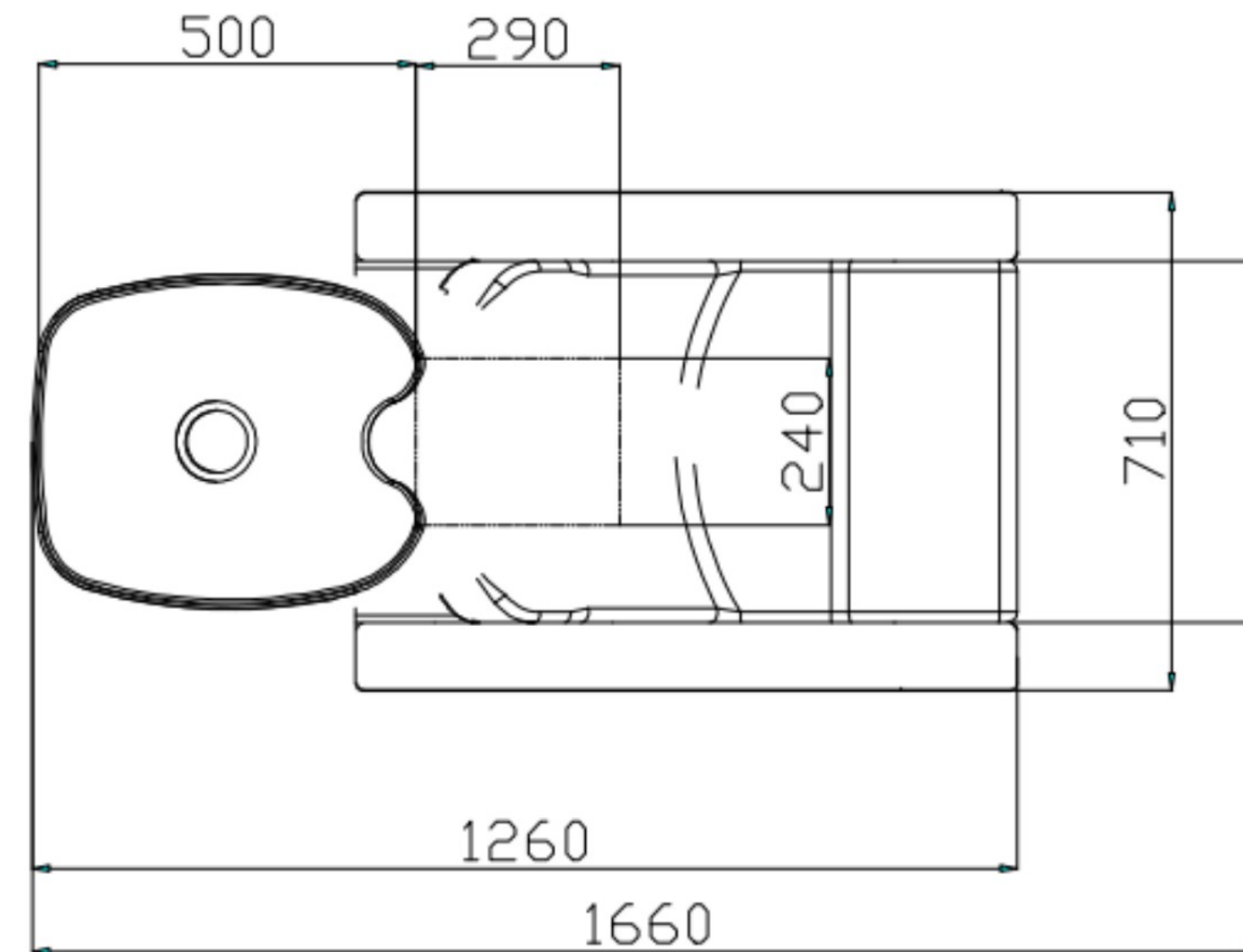

## Elektrisk utrustning Specifikationer


- 70 W
- 220 V
- 50 Hz

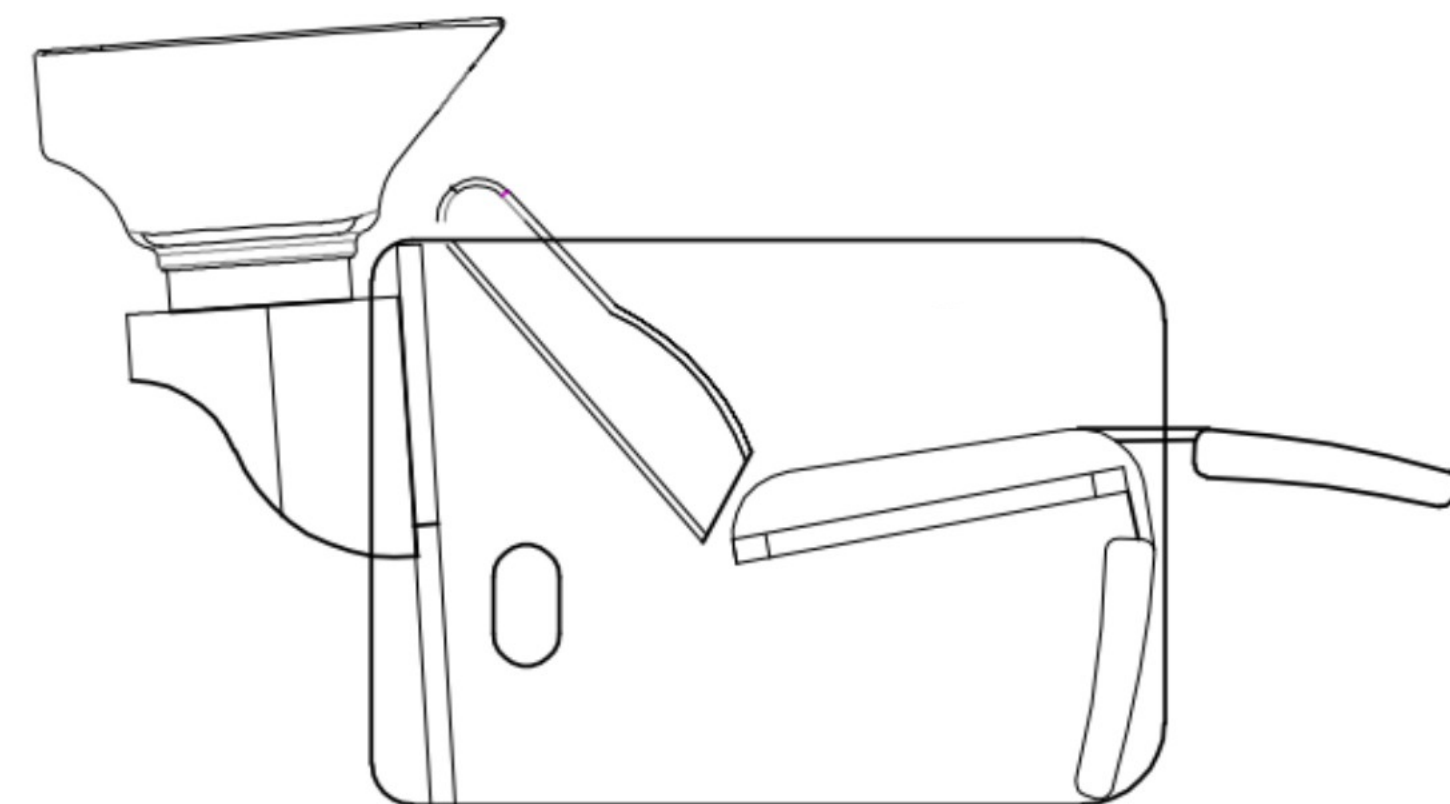


# STOL INSTALLATION



↑  
TILTSYSTEM

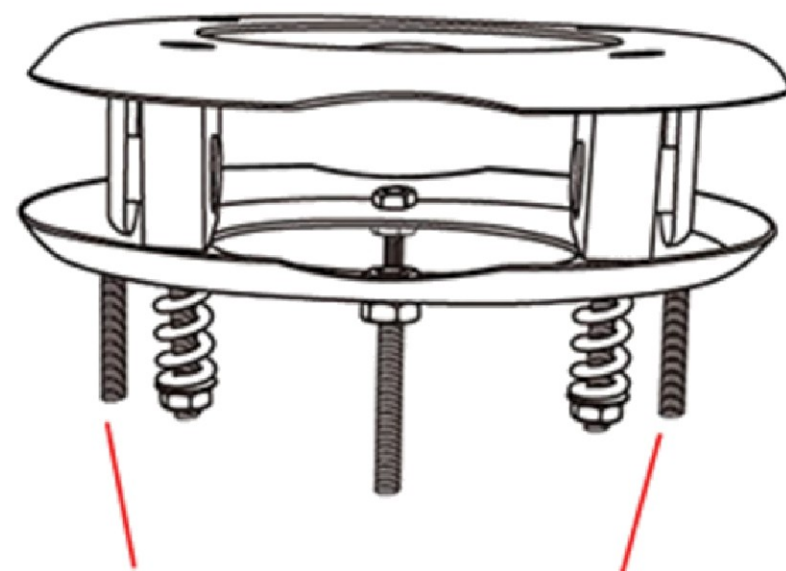


Bultar för att fästa bassängen på underredet

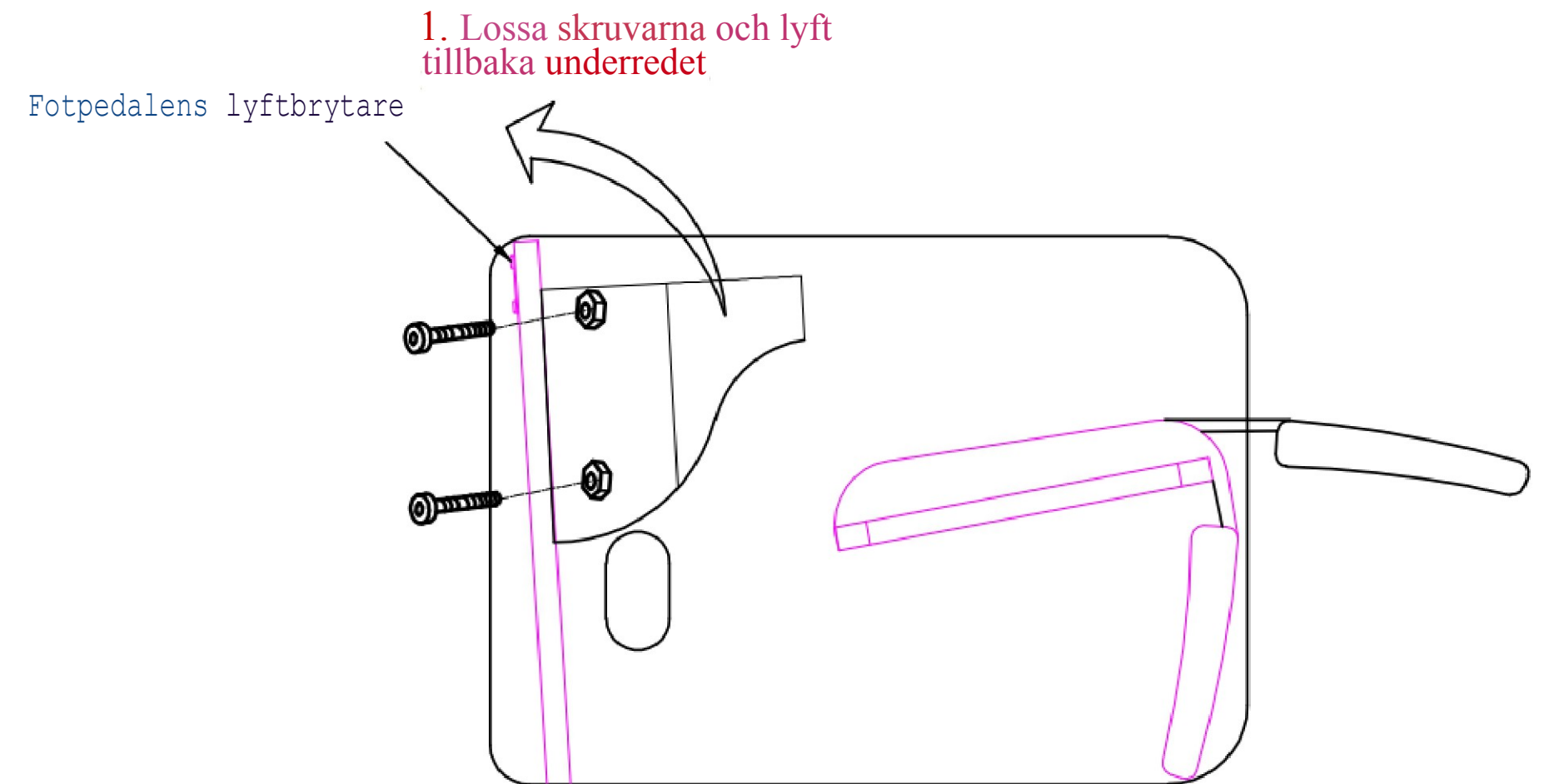


3. Sätt in bassängen i underredet och justera positionen genom att svänga, dra åt den ordentligt med skruvarna vid på framtill och baktill

4. Dra åt de två muttrarna till vänster och höger

7. Sätt tillbaka tillbaka

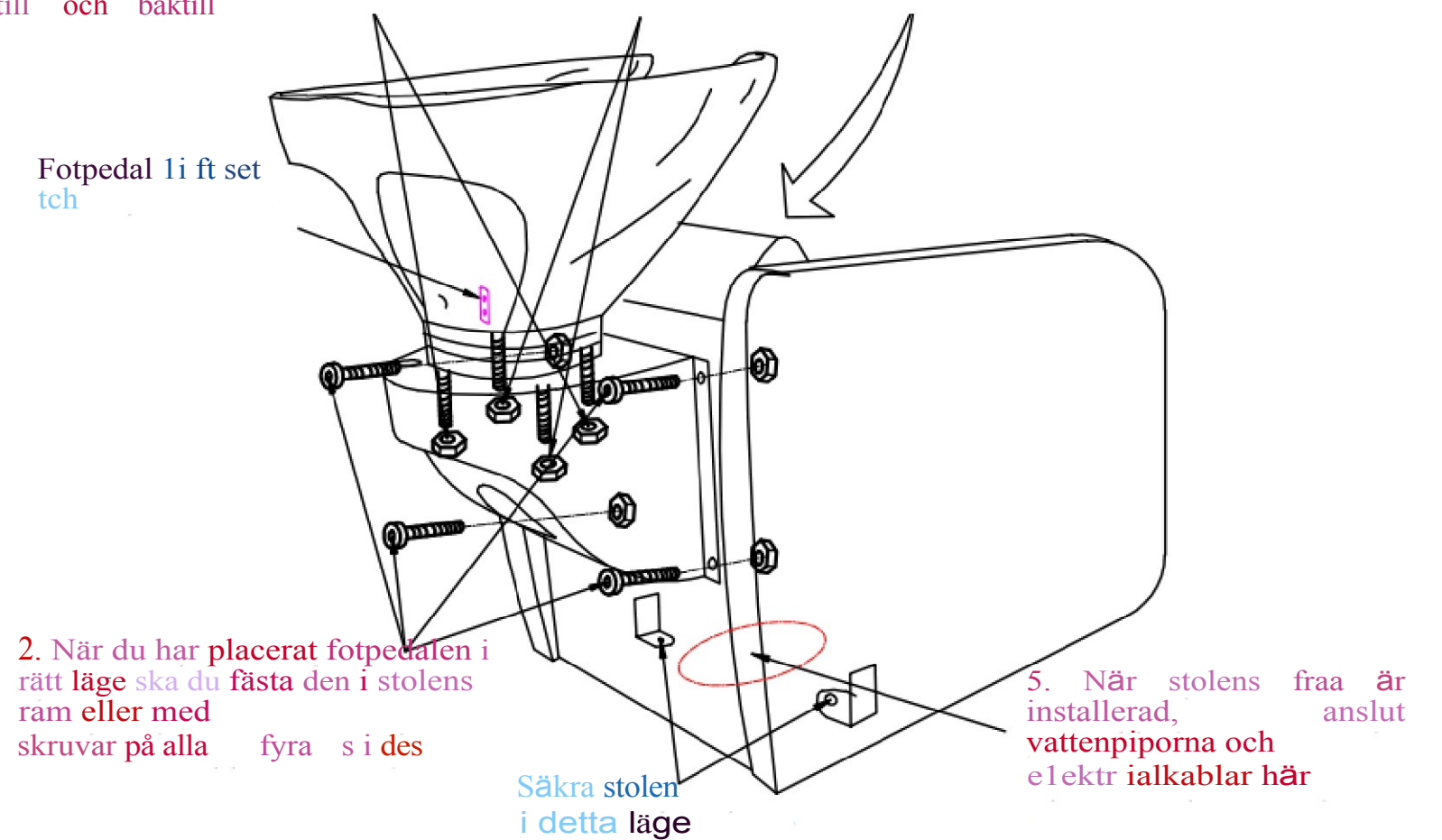


# TVÄTT INSTALLATION

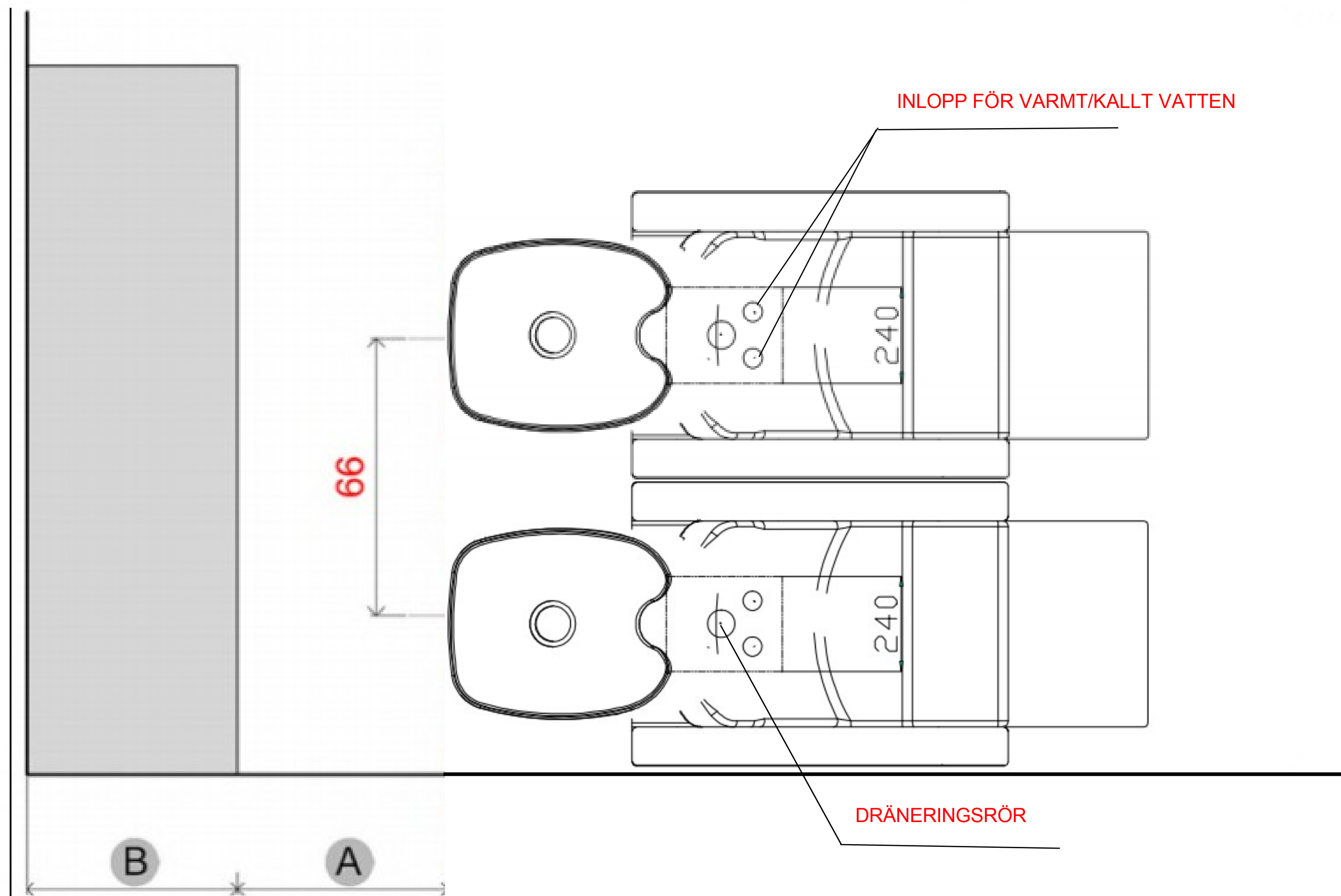

A Variabel storlek på arbetsyta (inte mindre än 50 cm)

B Backsplash-skåp - variabel storlek



# TVÄTT INSTALLATION

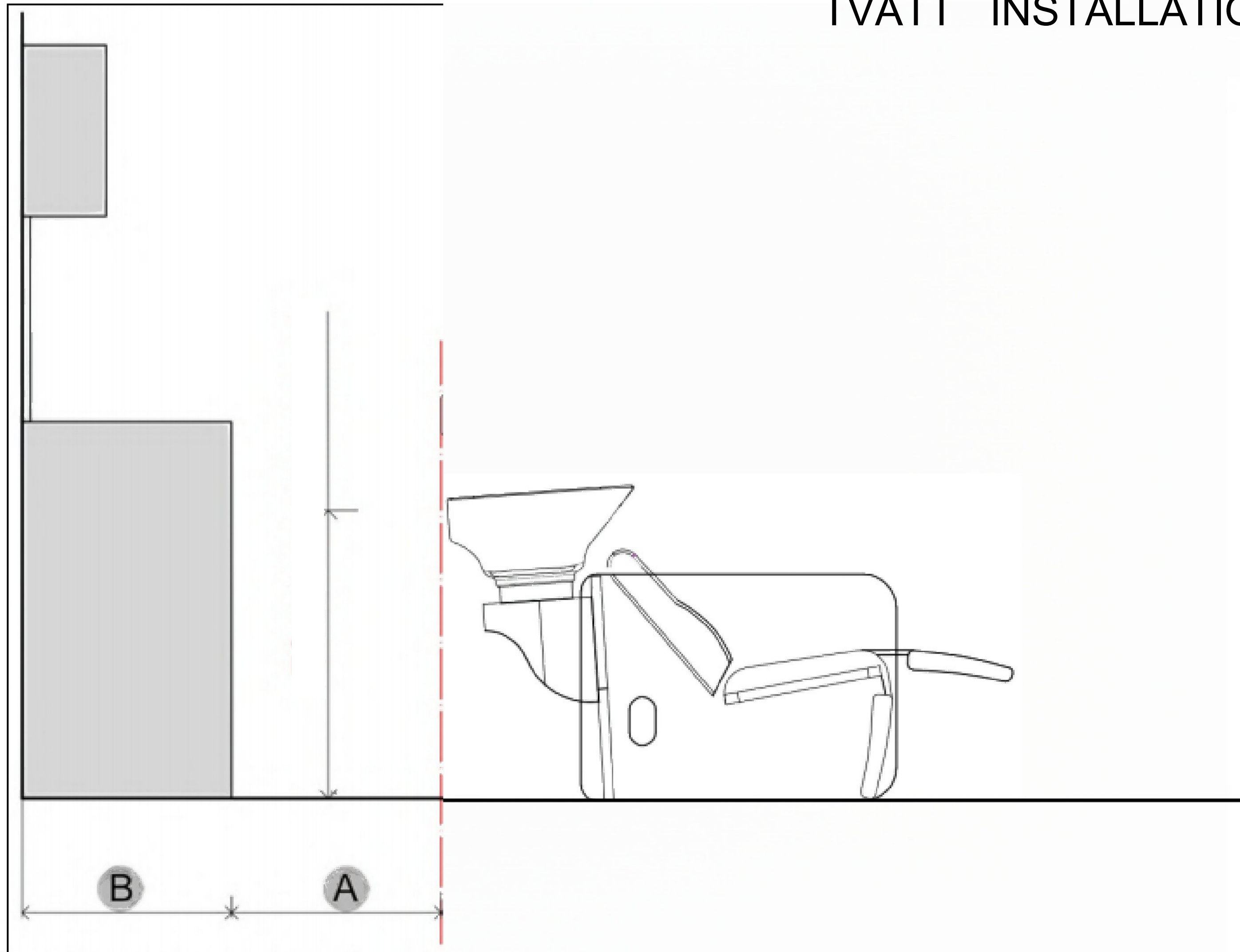

A Variabel storlek på arbetsyta (inte mindre än 50 cm)

B Stänkskydd variabel storlek


# LUTNINGSSYSTEM

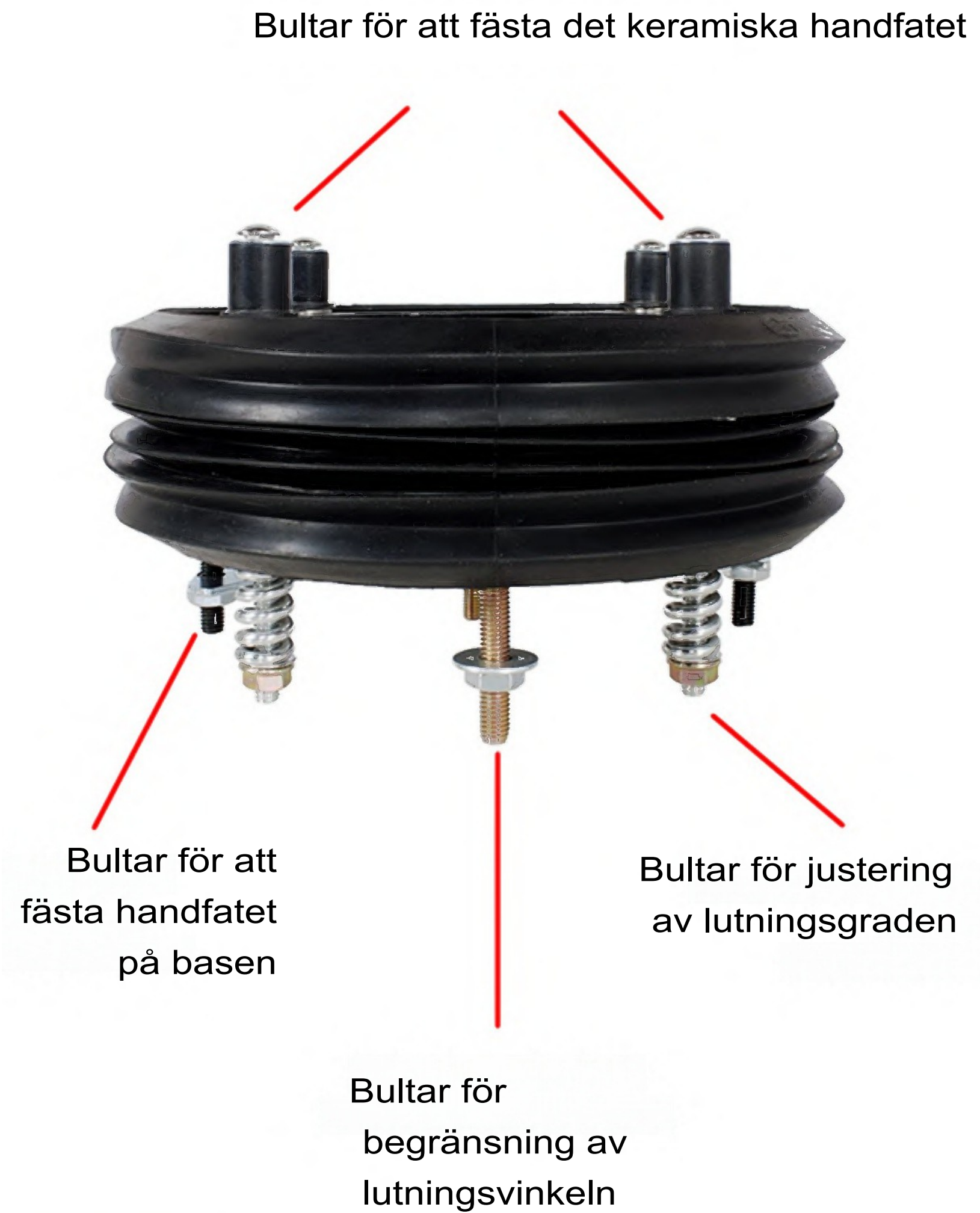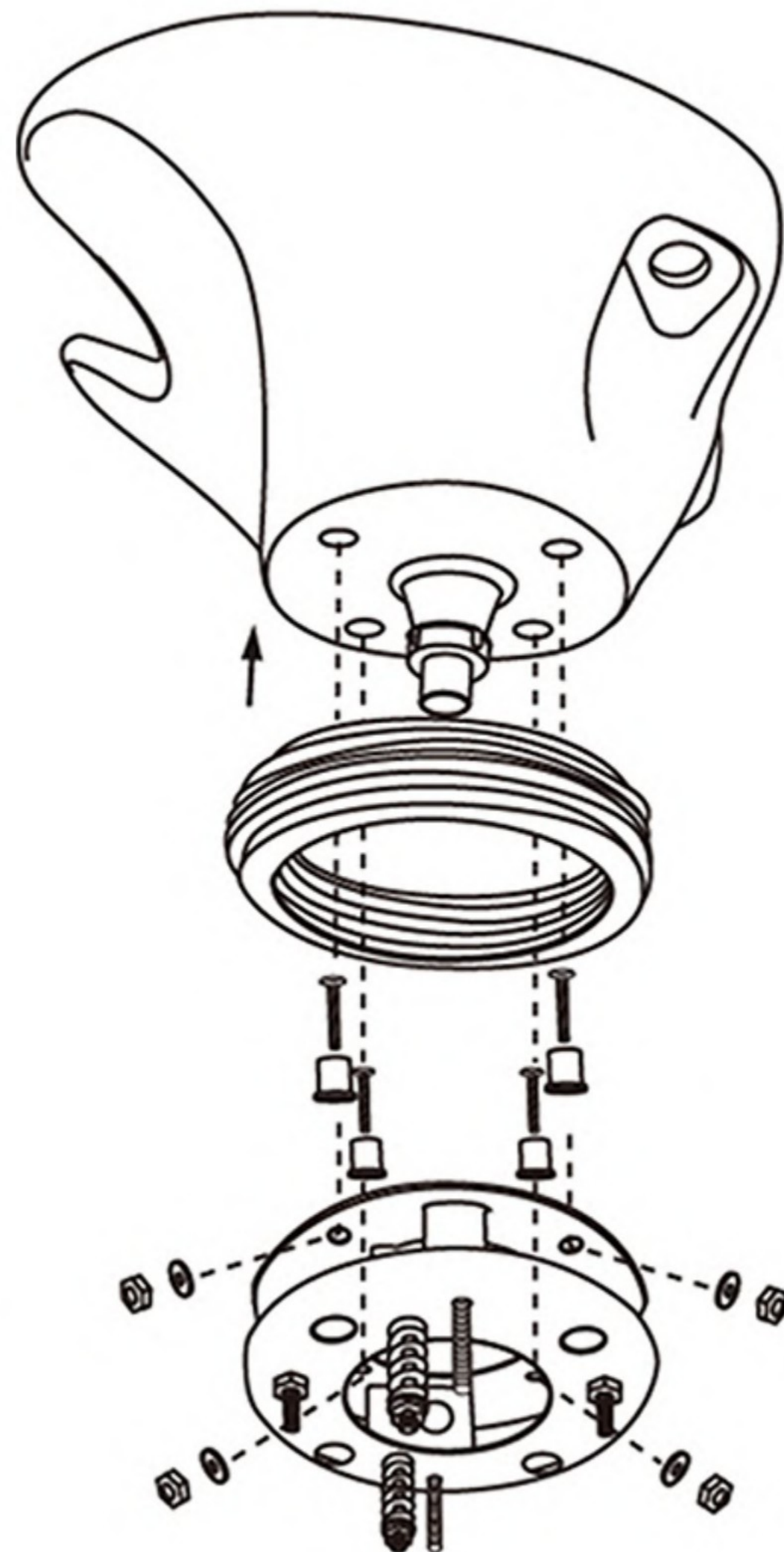


OBS: Avloppet måste installeras innan lutningssystemet installeras

# LUTNINGSSYSTEM


Justera skruvarna och bultarna enligt följande bilder för att antingen begränsa eller inte begränsa lutningsvinkeln för (keramik) (bassäng.)

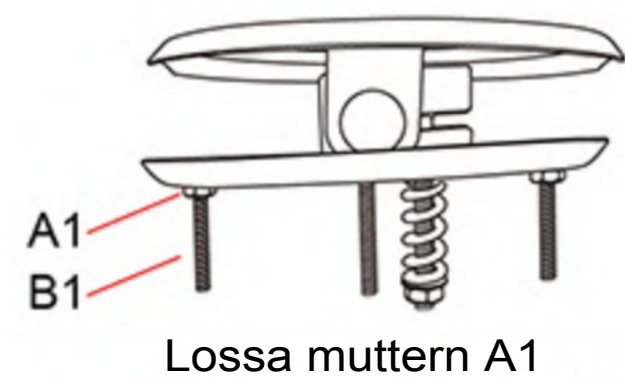


Lossa muttern A1

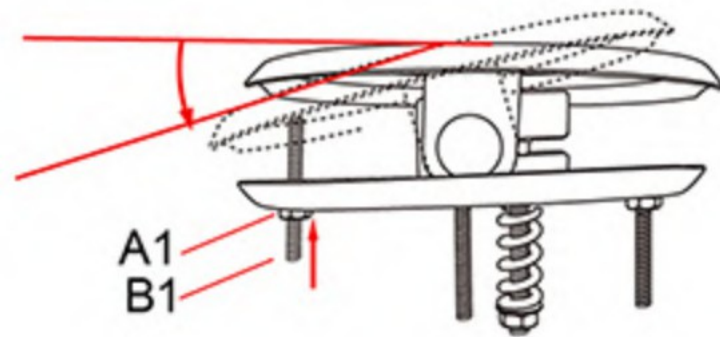


Dra åt B1-skruven uppåt och dra åt A1-muttern

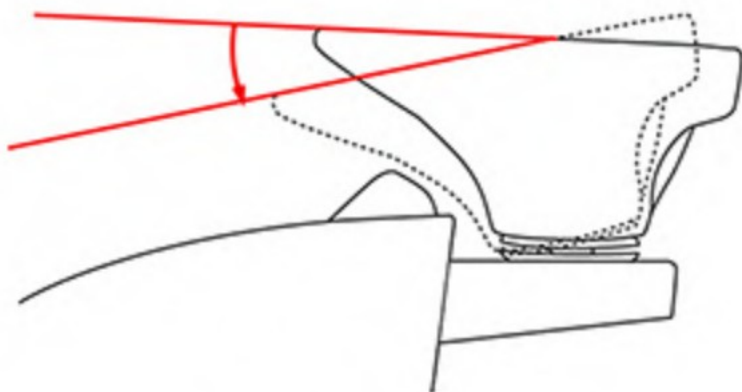


Justera lutningsvinkeln för det keramiska handfatet nedåt

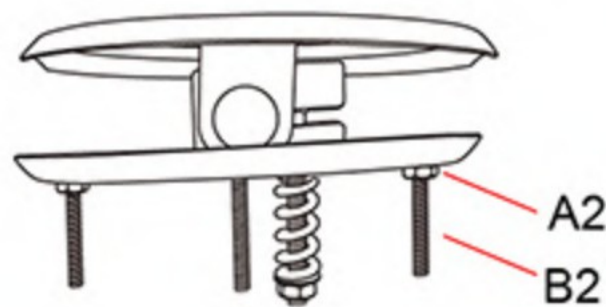

Lossa muttern A2


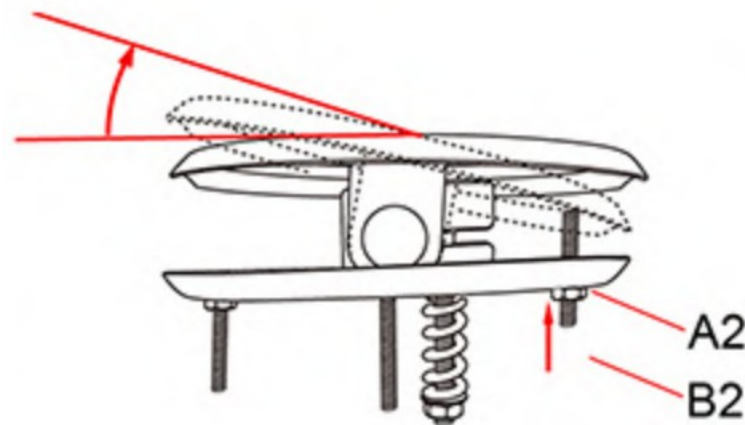


Dra åt B2-skruven uppåt och dra åt A2-muttern

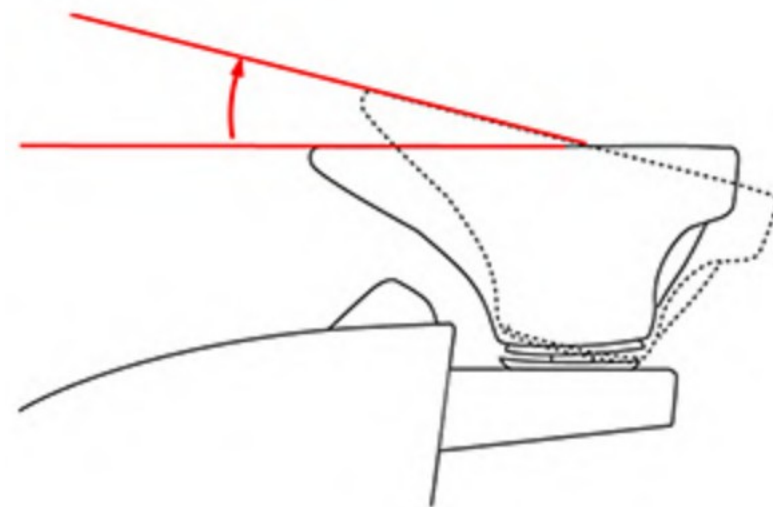

Justera lutningsvinkeln på det keramiska handfatet uppåt

Dra åt eller lossa C1- och C2-bultarna på samma sätt för att kontrollera lutningsgraden på det keramiska handfatet.

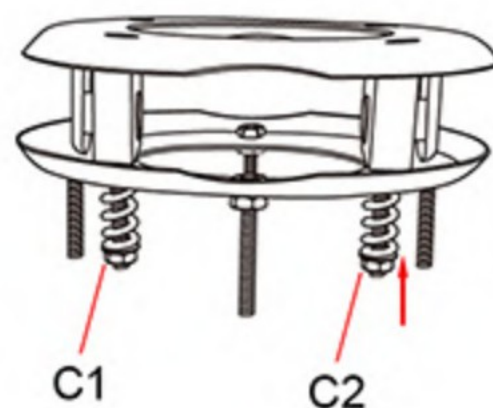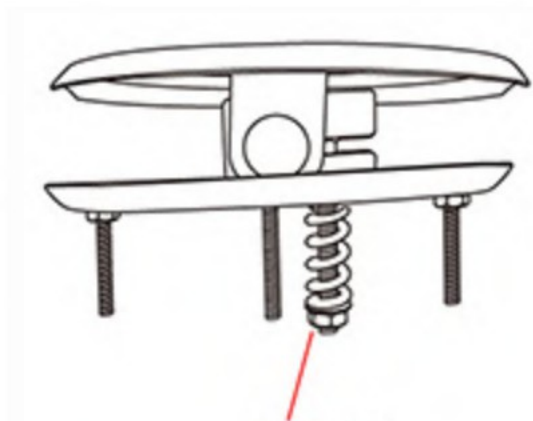

C1,C2

